




neodisher[®] SB eco



Spezialnachspülmittel zum Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken

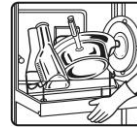

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Kalkabbindung und Nachspülung bei der Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten mit Dampfdesinfektion

Leistungsspektrum:

- Verhindert zuverlässig Kalkablagerungen im Dampferzeuger, in Rohrleitungen und Düsen
- Leicht sauer eingestellte Formulierung für eine wirksame Wasserhärte-Abbindung

Besondere Eigenschaften:

- Für fleckenfreie Steckbecken und Urinflaschen ohne Kalkablagerungen
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Leicht sauer eingestellt, auf Basis organischer Säuren

Anwendung und Dosierung:

neodisher SB eco wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für Steckbecken und Urinflaschen mit Dampfdesinfektion eingesetzt. Die Dosierung erfolgt über die maschinenseitig vorhandenen Dosiergeräte und beträgt je nach Wasserhärte 4 - 12 ml pro Zyklus bei einem Wasservolumen von 8 l. Auf Säurebeständigkeit von Dosiersystemen und Dampferzeugern achten.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz von neodisher SBR extra, einem Spezialreiniger für Steckbecken und Urinflaschen.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inkl. Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Spülgutherstellers.
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.

Technische Daten:

pH-Wert	3,7 - 3,0 (0,5 - 1,5 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 50 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	1,1 g/cm ³ (20 °C)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % Polycarboxylate
außerdem Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Methylchloroisothiazolinon/Methylisothiazolinon)

CE-Kennzeichnung:


neodisher SB eco erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte.

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten.



neodisher[®] SB eco

Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig.
Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett
hinter dem Symbol 

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in
den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter
www.drweigert.de in der Rubrik
„Service“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen
entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe
Sicherheitsdatenblatt.

MB 4067/3-2 Stand 01/2016



Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.
