



DR. WEIGERT

Higiena systemowa

Innowacja produktowa 2021



**Myśleć
dalekosięźnie –
robić postępy.**

Odkryj neodisher®
MediClean advanced.

Zawsze potrzeba
kogoś, kto popro-
wadzi, **by odkrywać**
nowe drogi!

Systemy higieny

Trudno znaleźć dziedzinę, która byłaby równie wrażliwa na kwestie higieny jak obszar medyczny. Wspólnie z partnerami z przemysłu i we współpracy z Centralnymi Sterylizatorniami firma Dr. Weigert ciągle doskonali reprocessing instrumentarium medycznego.

Nie bez przyczyny Dr. Weigert od lat jest liderem rynku w dziedzinie innowacyjnych zastosowań i procesów, które nie tylko są proste, bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne, ale również zapewniają ochronę narzędzi, a tym samym zachowanie ich wartości.

W porę rozpoznawać wymagania – tym wyróżnia się Dr. Weigert.

Rozwój i optymalizacja naszych produktów odbywają się w ścisłej współpracy między naszymi klientami, użytkownikami w centralnych sterylizatorniach i naszym działem badawczym. Wczesne rozpoznawanie potrzeb klientów i ich szczególnych wymagań, to jedna z najważniejszych kompetencji konsultantów neodisher®.

Ścisła współpraca z uczestnikami procesu oraz wartość zgromadzonych przez nich doświadczeń stanowiły podstawę naszej ostatniej innowacji służącej do maszynowego oczyszczania narzędzi, która łączy w sobie następujące właściwości:

- silny koncentrat o wyjątkowej skuteczności mycia przy niewielkim zużyciu produktu
- nadaje narzędziom blask i połysk
- usuwa matowe osady, zapewniając na długo optymalny wygląd i właściwości narzędzi
- troska o środowisko przez ochronę zasobów
- doskonała kompatybilność materiałowa, a tym samym ochrona materiału

Na następnych stronach przedstawiamy, jakie można odnieść korzyści z innowacyjnych właściwości neodisher® MediClean advanced.



Większa siła
mycia, lepszy
wygląd!



Postęp zapewnia bezpieczeństwo.

neodisher® MediClean advanced to nowy poziom skuteczności maszynowego oczyszczania narzędzi. Doskonałe wyniki czyszczenia zostały potwierdzone w wielu próbach praktycznych.

Maksymalne
**bezpieczeństwo
higieniczne.**

Skoncentrowany i wydajny.

Szczególną skuteczność czyszczenia mocno stężonego produktu potwierdzono w licznych testach.

Olśniewające
wyniki – nawet **pod
mikroskopem.**

Błysk w każdym szczególe.

Połysk narzędzi zachwyca nie tylko na pierwszy rzut oka – również kontrola pod mikroskopem pokazuje, że mocno stężony środek oczyszcza, chroniąc materiał.

NOWOŚĆ



**Różnica
widoczna od
pierwszego
mycia.**

Ponieważ mniej znaczy więcej.

Dzięki mniejszemu zużyciu produktu można uczynić logistykę bardziej przyjazną środowisku.

**Tak,
to możliwe:
Silniejsze działanie i
zrównoważony
rozwój.**

Wzrost rentowności.

Maksymalna higiena przy jednoczesnej ochronie materiału jest również silnym argumentem ekonomicznym.

**Inwestowanie
w trwałość opłaca się
od pierwszych dni.**

Optymalizacja pracy.

Oferując mocno stężony środek, możemy znacznie ułatwić Waszemu personelowi codzienną pracę. Rzadsza wymiana kanistrów to duże odciążenie.



**Łatwiejsz a
obsługa
dla lepszej ochrony
indywidualnej.**

Imponujący wygląd i właściwości.


Wykonane testy praktyczne pokazują, że dokładniejsze usuwanie matowych osadów przywraca optymalny wygląd oraz właściwości narzędzi i pozwala zachować je na długo.



**Znakomita wydajność i rewelacyjne wyniki przy
użyciu neodisher® MediClean advanced.**

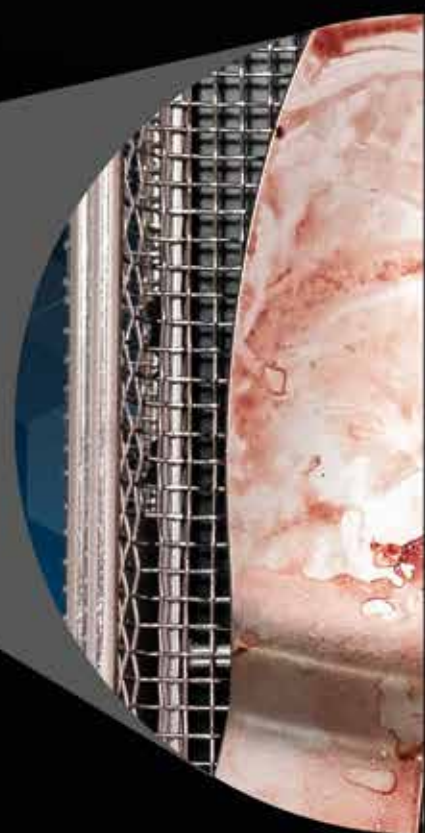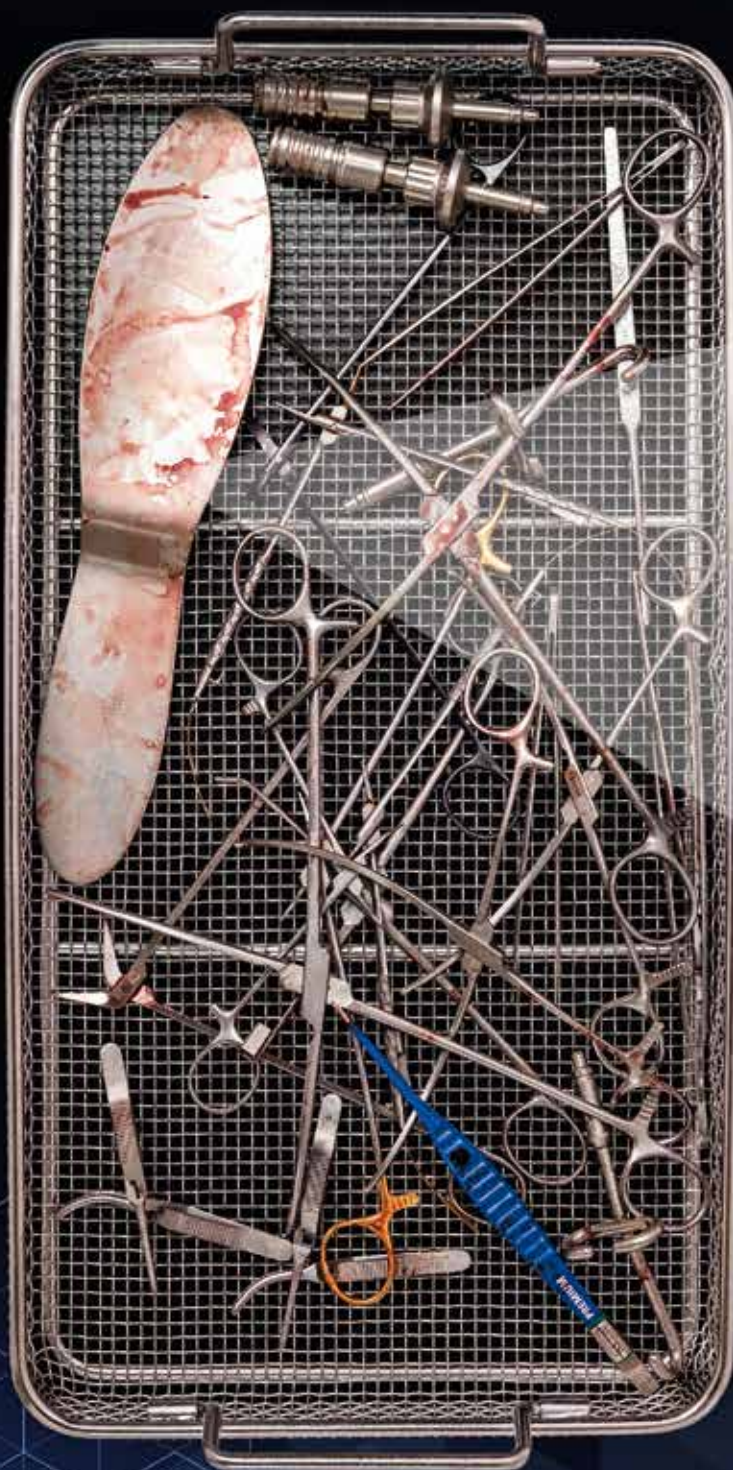

Narzędzia z zaschniętymi pozostałościami krwi i białka

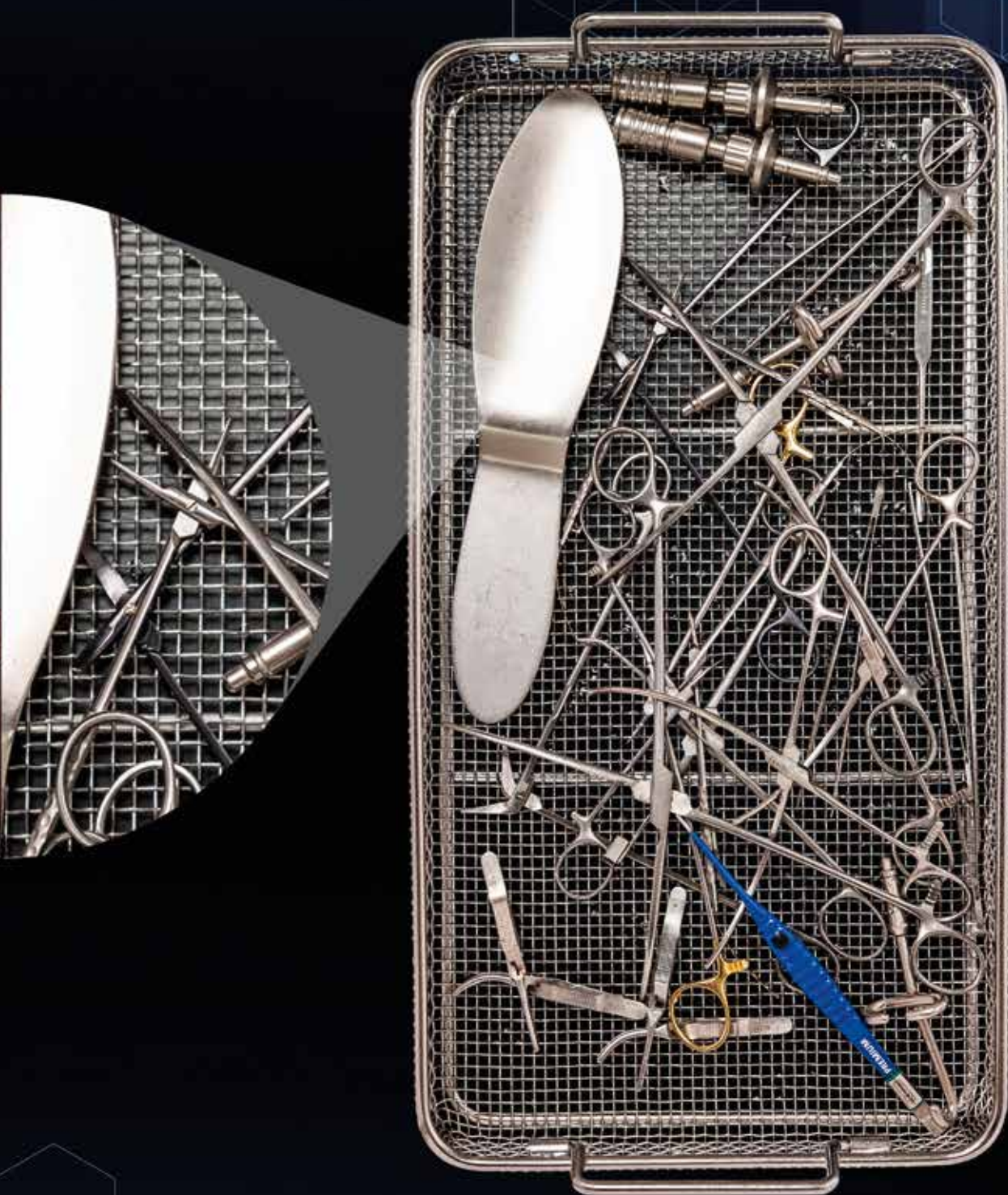

Narzędzia oczyszczone środkiem
neodisher® MediClean advanced

Najcenniejszą
perspektywą naszych
innowacji produktowych
**jest spojrzenie z
punktu widzenia
praktyki.**



Bliskość klienta traktujemy dostownie!

Dopiero gdy jakość naszych innowacji trwale sprawdzi się w praktyce, autorzy naszych produktów są u celu swoich dążeń.

O narzędzia i akcesoria medyczne należy dbać skutecznie i ekonomicznie. Firma Dr. Weigert, specjalista od rozwiązań higienicznych w reprocessowaniu wyrobów medycznych, zna najróżniejsze wymogi i trudności związane z różnorodnymi zanieczyszczeniami w poszczególnych obszarach działalności medycznej.

Intensywna wymiana informacji z osobami odpowiedzialnymi za dekontaminację wyrobów medycznych oraz nasze długoletnie doświadczenie przyczyniają się do ciągłego rozwoju i udoskonalania naszych produktów. Na każde wyzwanie znajdziemy rozwiązanie – od obróbki wstępnej przez czyszczenie po pielęgnację narzędzi. W ten sposób możemy zagwarantować pierwszorzędne wyniki i zachowanie wartości instrumentarium.

W razie dalszych pytań dotyczących wprowadzenia środka **neodisher® MediClean advanced** do Twojej placówki ochrony zdrowia oraz w sprawie warunków zakupu prosimy zwracać się do konsultanta ds. **neodisher®**.





„Byłem pod wrażeniem testów z **neodisher® MediClean advanced**. Narzędzia błyszczą i nawet zaschnięte pozostałości zostały usunięte, przy zastosowaniu najmniejszego stężenia użytkowego”.

Sven Weingarte, Centralna Sterylizatornia, Klinika Magdeburg

Odkryj
innowację
neodisher® MediClean
advanced.



neodisher® MediClean advanced – innowacja w reprocesowaniu wyrobów medycznych.

neodisher® MediClean advanced

Innowacyjny, silnie stężony środek myjący wykazuje doskonałe właściwości czyszczące w połączeniu z maksymalną wydajnością zapewniającą optymalną rentowność.

- Do maszynowego czyszczenia narzędzi termostabilnych i termolabilnych, w tym narzędzi MIC i mikronarzędzi, narzędzi dentystycznych, sprzętu anestezjologicznego, pojemników oraz innego sprzętu medycznego
- Do ręcznego mycia narzędzi termostabilnych i termolabilnych w kąpeli zanurzeniowej lub ultradźwiękowej
- Odpowiedni także do ręcznego i maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych wykorzystywanych w technologii da Vinci-Endo-Wrist i innych narzędzi do zabiegów chirurgii robotycznej



220 kg beczka
4130 13



20 l kanister
4130 26



10 l kanister
4130 30



5 l kanister
4130 35****



5 l kanister
4130 33****



6 x 2 l butelka
4130 41

Podstawa sukcesu:

- minimalna dawka
- usuwa matowe osady, zapewniając na długo optymalny wygląd i właściwości narzędzi
- nadaje narzędziom blask i połysk
- redukcja biofilmów została sprawdzona i potwierdzona na podstawie specyfikacji ISO/TS 15883-5:2005

Zalecane stosowanie:

maszynowe mycie instrumentów termostabilnych i termolabilnych

1 - 3 ml/l (0,1 - 0,3%)*,
40 - 60 °C, 5 - 15 min**

maszynowe mycie pojemników z anodowanego aluminium

1 - 2 ml/l (0,1 - 0,2%)*,
40 - 50 °C, 3 - 5 min**

maszynowe mycie narzędzi stosowanych w chirurgii robotycznej

2 - 3 ml/l (0,2 - 0,3%)*,
40 - 60 °C, 10 - 30 min***

mycie ręczne instrumentów termostabilnych i termolabilnych w kąpeli zanurzeniowej i ultradźwiękowej

1 - 10 ml/l (0,1 - 1%)*,
5 - 30 min**

mycie ręczne w kąpeli zanurzeniowej i ultradźwiękowej narzędzi używanych w chirurgii robotycznej

5 - 10 ml/l (0,5 - 1%)*,
5 - 30 min**/***

Nasza kompetencja – Twoja korzyść:

- silnie skoncentrowany
- doskonale usuwa pozostałości zaschniętej lub zdenaturowanej krwi, białka, tłuszczu, śluzu, wydzieliny i tkanki kostnej
- bardzo dobra kompatybilność materiałowa
- możliwe wcześnie dozowanie środka myjącego, można dodać już do zimnej wody (bezpośrednio po napełnieniu zbiornika)



- maksymalna wydajność przy minimalnym dozowaniu
- pierwszorzędna skuteczność mycia dzięki zastosowaniu wyjątkowej receptury na bazie składników alkalizujących, środków powierzchniowo czynnych, środków kompleksujących i enzymów
- nadaje się do narzędzi, przyrządów optycznych i sprzętu ze stali nierdzewnej (np. 1.4301), stali narzędziowej (np. 1.4034), tytanu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych nadających się do sterylizacji, sprzętu anestezjologicznego oraz anodowanego aluminium
- słabo pieniający, co przeciwdziała przerywaniu programu w myjni dezynfektor

* Dozowanie zależne od stopnia zanieczyszczenia

** Czas oddziaływania zależy od jakości wody, stopnia zanieczyszczenia i mechaniki mycia

*** Należy uwzględnić zalecenia producenta wyrobów medycznych dotyczące poddawania ich procesowi zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 17664 i kontroli procedur

**** Artykuł 413033 jest przeznaczony do wszystkich procesów maszynowych, artykuł 413035 pasuje do urządzenia dozującego środki dezynfekcyjne, takich jak neomatik® mediDOS



DR. WEIGERT
Higiena systemowa



Zawsze blisko by odpowiedzieć na pytania odnośnie higieny –
W Europie i Świecie:

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

