

# Medical



**DR. WEIGERT**



Tratamiento seguro de Cuñas y Botellas de Orina



**neodisher® –**

**para una Higiene Perfecta**



## Tratamiento Automatizado

Hoy en día se utilizan modernas lavadoras para la limpieza y desinfección de cuñas y botellas de orina. El agente químico debe ser sincronizado de forma óptima con el tipo y marca de la lavadora de cuñas.

Tras décadas de experiencia, Dr. Weigert es líder del mercado en el tratamiento de dispositivos médicos. ¡Confíe en nuestros conocimientos!

## Limpieza

La limpieza de cuñas y botellas de orina se realiza en varios pasos; En primer lugar la suciedad más difícil se enjuaga con agua fría, seguido por el siguiente paso de limpieza con agua caliente para eliminar los residuos que quedan. Para eliminar los residuos más incrustados le recomendamos que utilice neodisher® SBR extra. Si se utiliza neodisher® SBR extra, la lavadora de cuñas debe estar equipada con una bomba de dosificación adicional.



## Desinfección por vapor

Con lavadoras de cuñas mediante un proceso de tratamiento térmico, la desinfección se realiza con una mezcla de vapor y agua caliente. El generador de vapor es el corazón de la máquina y debe estar protegido contra la formación de cal, ya que causaría tiempos de calentamiento más largos, mayor consumo de energía y, en el peor de los casos, el sobrecalentamiento y por tanto la destrucción de sus elementos. ¡neodisher® SBK, neodisher® SBN o neodisher® SBX ofrecen una protección segura!


Antes o después de la desinfección térmica, tiene lugar un aclarado con agua tibia. neodisher® SBK, neodisher® SBN y neodisher® SBX previenen la formación de cal en los inyectores y en la cámara de lavado. Además, neodisher® SBK y neodisher® SBN consiguen un secado rápido y libre de manchas.

sin neodisher® SBK,  
neodisher® SBN  
o neodisher® SBX



con neodisher® SBK,  
neodisher® SBN  
o neodisher® SBX

sin neodisher® SBK  
o neodisher® SBN

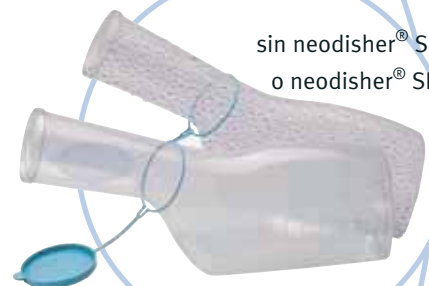

con neodisher® SBK  
o neodisher® SBN

Medical

# Tratamiento seguro de Cuñas y Botellas de Orina

## neodisher® -Soluciones para todo tipo de máquinas



### neodisher® SBR extra

Suave con el material, elimina los residuos más incrustados, manchas y los residuos de citostáticos en las heces\*. Adecuado para lavadoras de cuñas equipadas con una bomba de dosificación de detergente.



### neodisher® SBX

Agente de aclarado para prevenir la formación de depósitos de cal. neodisher SBX® es adecuado para todas las lavadoras de cuñas.

## Seguridad y larga duración

Todos los productos neodisher® para el tratamiento de cuñas son suaves con el material, tales como el acero inoxidable y el plástico, por ej. el policarbonato (PC) y los polisulfonatos (PSU), de lo que están hechas las botellas de orina y los cuencos de secreción.

Además, todos los productos cumplen los requisitos de la Directiva Europea 93/42/CE, Anexo I relativo a los productos médicos. Por lo tanto, tienen el marcado CE.

### neodisher® SBK

Combina descalcificador y agente de enjuague a base de ácidos orgánicos para prevenir la formación de cal en el generador de vapor, tuberías y boquillas. Ayuda a conseguir un secado rápido y libre de manchas. neodisher® SBK es adecuado para lavadores de cuñas resistentes al ácido.

### neodisher® SBN

Combina descalcificador y agente de enjuague a base de ácidos orgánicos y tensoactivos. Se previenen depósitos de cal en el generador de vapor, tuberías y boquillas. Para un óptimo secado, libre de manchas. neodisher® SBN es adecuado para lavadoras de cuñas resistentes al ácido.

\* Expresamente recomendado para la limpieza automática de cuñas y botellas de orina por el "Niederländische Arbeitsschutzvereinbarung Krankenhäuser" ("Grupo de trabajo holandés para Hospitales")



# Sistema y Soluciones para el Tratamiento de Cuñas

## Servicio bajo un mismo techo

Nuestro consultor neodisher® es la persona de contacto para todas las preguntas sobre higiene, su técnico y la "solución de sus problemas".

## Productos especiales neodisher®

... para lavadoras de cuñas:  
neodisher® SBR extra, neodisher® SBK, neodisher® SBN y neodisher® SBX.

Con nuestra experiencia, conocimientos y competencias, estamos trabajando en nuevas e innovadoras soluciones, "lo importante no es lo que podemos producir, sino las ventajas que nuestros clientes pueden obtener con nuestros productos".



## Central weigomatic® Dosificación y Sistemas de Control

El suministro automático de varias lavadoras de cuñas mediante un sistema de dosificación centralizado, garantiza un modo de operar especialmente económico y seguro. ¡La dosificación en un sistema cerrado ofrece una excelente protección al personal!



Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
Tel.: +49-40-7 89 60-0  
Fax: +49-40-7 89 60-120  
info@drweigert.de  
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS  
22 avenue des Nations  
Immeuble le Raspaill  
BP 88035 Villepinie  
95932 Roissy  
Ch De Gaulle Cedex  
Tel.: +33-1-48 67 90 33  
Fax: +33-1-48 67 29 14  
info@drweigert.fr  
www.drweigert.fr

Dr. Weigert  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Wienerbergstraße 11/12 a  
A-1100 Wien  
Tel.: +43-1-99460 6275  
Fax: +43-1-99460 5370  
info@drweigert.at  
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.  
ul. Francuska 18  
PL-03-906 Warszawa  
Tel.: +48-22-616 02 23/31  
Faks: +48-22-617 81 21  
office\_pl@drweigert.com  
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungária Kft.  
Hunyadi János út. 16  
H-1117 Budapest  
Tel.: +36-1-237 06 04  
Fax: +36-1-239 09 23  
info@drweigert.hu  
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV  
Narcisstraat 14  
NL-9404 RK Assen  
Tel.: +031-592-31 93 93  
Fax: +031-592-31 01 17  
info@drweigert.nl  
www.drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd  
Walling Court, Orbital Plaza,  
Walling Street, Cannock  
WS11 0EL  
United Kingdom  
Phone: +44 (0)1543 404 633  
Fax: +44 (0)1543 404 601  
enquiry@drweigert.com  
www.drweigert.co.uk

Dr. Weigert España  
Edificio Cuzco IV  
Paseo de la Castellana 141,  
Planta 8  
28046 - Madrid  
España  
Teléfono: +34 91 572 65 77  
Fax: +34 91 572 66 59  
info.spain@drweigert.com  
www.drweigert.es