




neodisher[®] MA Dental



Détergent alcalin pour le traitement en machine des instruments dentaires

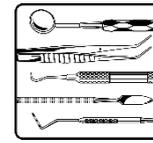

Poudre

Domaine d'utilisation :

- Nettoyage en machine d'instruments dentaires et d'ustensiles utilisés en cabinet dentaire tels que les plateaux, les gobelets de rinçage et les haricots.

Spectre d'efficacité :

- Possède une bonne efficacité détergente et émulsionnante pour éliminer les résidus de sang et de protéines
- Protège les instruments et ustensiles dentaires en acier inoxydable contre la corrosion.
- Ne convient pas pour le nettoyage en machine des contre-angles. Il est conseillé d'utiliser pour cela le détergent neodisher MediClean Dental

Propriétés particulières :

- Avec protection élevée des matériaux
- Particulièrement approprié pour les programmes avec désinfection thermique

Utilisation et dosage :

neodisher MA Dental s'utilise dans les laveurs-désinfecteurs pour instruments dentaires. Le dosage s'effectue au moyen du système de dosage sur porte de détergent en poudre et s'élève à 3 g/l.

Les instruments doivent être débarrassés des restes de composite, de ciment dentaire et de masse pour empreinte dentaire avant durcissement.

Pour éviter des taches d'eau, il est recommandé d'utiliser une eau déminéralisée lors du rinçage final.

La solution d'application neodisher MA Dental doit être entièrement rincée à l'eau (de préférence déminéralisée).

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour usage professionnel.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées.
- Les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.
- Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.

Données techniques :

Valeur pH	11,5 (3 g/l, déterminée en eau entièrement déminéralisée, 20 °C)
Densité apparente	env. 1.015 - 1.065 g/l
Facteur de titrage	0,54 (selon l'échelle de titrage neodisher)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :

- < 5 % de tensioactifs non ioniques
- > 30 % de phosphates

Marquage CE :

neodisher MA Dental satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.



Consignes de stockage :

Refermer le couvercle après usage ! S'il est exposé à l'humidité, le produit risque de s'agglomérer et de perdre de son efficacité. Conserver à une température comprise entre 0 °C et 30 °C. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 2 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole .

Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.com dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. Élimination de produit restant : voir la fiche de données de sécurité.

MB 4113/3-2 Version 02/2021