




neodisher[®] MA

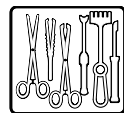

Tisztítószer hőstabil és hőérzékeny műszerek és laboratóriumi üvegedények tisztításához

por

Alkalmazási terület:

- Sebészeti eszközök, érzéstelenítő felszerelések, műtéti cipők és egyéb orvosi eszközök, valamint cumisüvegek gépi tisztítása kórházakban és orvosi rendelőkben
- Laboratóriumi üvegedények gépi tisztítása orvosi, biológiai és kémiai laboratóriumokban

Teljesítmény spektrum:

- Jó tisztító hatás vér-, fehérje- és élelmiszer-maradványokkal szemben
- Alkalmazható laboratóriumi üvegedényekhez, nemesacélhoz, műszeracélhoz, tiszta alumíniumhoz, alumínium-magnézium ötvözetekhez, krómozott eszközökhöz, közönséges műanyagokhoz, valamint érzéstelenítő felszerelések anyagaihoz.
- Eloxált tárgyak esetében a neodisher MA csökkenti a lágyított víz eloxált rétegre gyakorolt agresszív hatását.
- Minden vízkeménységi foknál alkalmazható.

Különleges tulajdonságok:

- Kiváló anyagvédelem
- Különösen kíméli a skálabeosztásokat
- Habzáscsökkentő hatású

Alkalmazás és adagolás:

A neodisher MA speciális mosogatógépekben használható.

Az adagolás mennyisége többek között az alkalmazási területtől és a műszerek vagy laboratóriumi üvegedények szennyezettségétől függ, és 1–4 g/l.

Példák az alkalmazásra:

Műszerek előkészítése:	
Tisztítás neodisher MA-val	3 g/l, 55°C
Semlegesítés neodisher Z-vel	1 - 2 ml/l

Táptalajmaradványok, reagensek, vér és szérum eltávolítása	
Tisztítás neodisher MA-val	3 g/l
Semlegesítés neodisher Z-vel	1 - 2 ml/l
A táptalajt a tisztítás előtt ki kell szűrni. A színezékek, például gentianaviolett stb. eltávolításával kapcsolatban felmerülő nehézségek esetén előmosáshoz használjon neodisher [®] N-t vagy neodisher [®] LaboClean GK-t.	

Tej-, bébiétel- és pépmaradékok eltávolítása	
Tisztítás neodisher MA-val	3 g/l, 70 - 95 °C
Semlegesítés neodisher Z-vel	1 ml/l

A tisztítási lépésben és az utolsó öblítésben teljes mértékben sótalanított víz használata ajánlott.

Általános használati utasítás:

- Kizárólag ipari felhasználásra.
- Ne keverje más termékekkel.
- A neodisher MA alkalmazási oldatot maradéktalanul ki kell öblíteni vízzel (lehetőleg teljesen ioncserélt vízzel).
- Az előkészítést a KRINKO¹ és a BfArM² ajánlásainak, valamint az orvostechnikai eszközök üzemeltetéséről szóló rendeletnek megfelelően, arra alkalmas eljárásokkal kell elvégezni.



neodisher[®] MA

- Kérjük, vegye figyelembe a műszer gyártójának előkészítési ajánlásait a DIN EN ISO 17664 követelményeinek megfelelően.
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítő készülékek gyártójának használati utasításait.
- Kérjük, vegye figyelembe a laboratóriumi üveggyártók tisztítási ajánlásait, valamint a Laboratóriumi Üvegek Előkészítésével Foglalkozó Munkacsoportnak (AK LAB) az AK LAB brossúra legújabb kiadásában megjelent ajánlásait („Laborglasaufbereitung – Laborglas sicher und rückstandsfrei aufbereiten“ (Laboratóriumi üvegedények előkészítése – Laboratóriumi üvegedények biztonságos és maradványmentes előkészítése).

Tároláskor 0 és 30°C közötti hőmérsékletet kell biztosítani. Megfelelően tárolva 2 évig eltartható.

Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum mögött

Veszélyre figyelmeztető és biztonsági utasítások:

A biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatók. Ezek a www.drweigert.hu weboldalon a „szolgáltatások/letöltések” részben érhetők el.

A csomagolást csak teljesen kiürítve és lezárva ártalmatlanítsa. A töltőanyag-maradványok ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

Műszaki adatok:

pH-érték	11,5 - 12,1 (1 - 4 g/l, ioncserélt vízben meghatározva, 20°C)
Térfogatömeg	kb. 915 - 965 g/l
Titrlási tényező	0,44 (a neodisher titrlási utasítás szerint)

MB 4107/3-1 2020. januári állapot

¹ Kórházi higiénia és fertőzésmegelőzés a Robert Koch Intézetben

² A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök szövetségi intézete

Összetevők:

A tisztítószer összetevői a mosó- és tisztítószerekről szóló

648/2004/EK rendelet szerint:

< 5 % nem ionos felületaktív anyagok

> 30 % foszfátok

CE-jelölés:

A neodisher MA megfelel az európai orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályok előírásainak.

A termékkel kapcsolatos súlyos eseményekről értesíteni kell a gyártót és az illetékes hatóságot.

Tárolási utasítások:

A fedelet eltávolítás után zárja vissza! A termék nedvesség hatására összezsugorodhat és elveszítheti hatékonyságát.

A jelen adatlapon szereplő adatok a legfrissebb ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatok és kísérletek elvégzésének kötelezettsége alól.