




Détergent pour le traitement en machine d'instruments dentaires Concentré liquide

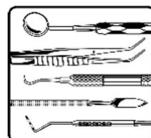

Domaine d'application :

- Nettoyage en machine d'instruments dentaires, y compris de contre-angles et d'ustensiles utilisés en cabinet dentaire tels que les plateaux, les gobelets de rinçage et les haricots.
- Nettoyage manuel d'instruments dentaires, en bain de trempage et à ultrasons

Spectre d'efficacité :

- Élimine de manière fiable les résidus de sang séché et dénaturé
- Assure un fort appauvrissement des matières organiques et empêche les nouveaux dépôts de résidus protéiques
- Favorise l'élimination des biofilms
- Compatible avec les instruments dentaires et ustensiles en acier inoxydable, les matières plastiques courantes et les matériaux des contre-angles
- La compatibilité avec l'aluminium anodisé doit être vérifiée au préalable.

Propriétés particulières :

- Très bon respect des matériaux
- Excellent pouvoir nettoyant grâce à une formulation unique à base de donneurs d'alcalinité, de tensioactifs et d'enzymes
- En cas d'utilisation pour le prétraitement manuel, aucun rinçage de la solution détergente n'est requis avant le traitement en machine avec neodisher MediClean Dental
- Non soumis à étiquetage : aucune substance dangereuse, aucun produit dangereux

Utilisation et dosage :

neodisher MediClean Dental peut être utilisé dans des laveurs-désinfecteurs ainsi que dans des bains de trempage et à ultrasons. La quantité de dosage dépend du degré d'encrassement des objets à laver.

Les paramètres suivants sont recommandés lors de l'utilisation de neodisher MediClean Dental :

Nettoyage en machine et manuel d'instruments dentaires :

Nettoyage en machine d'instruments dentaires	2 – 10 ml/l (0,2 – 1,0 %)*, p. ex. 40 – 60 °C, 10 min
Recommandation standard	5 ml/l (0,5 %)*, p. ex. 55 °C, 10 min
Nettoyage manuel d'instruments dentaires, en bain de trempage et à ultrasons	5 – 20 ml/l (0,5 – 2 %)*, max. 40 °C, 10 – 30 min

* la quantité de dosage dépend notamment du degré d'encrassement

Pour le dosage, utiliser des appareils de dosage appropriés.

Les instruments doivent être débarrassés des restes de composite, de ciment dentaire et de masse pour empreinte dentaire avant durcissement.

Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée lors de l'étape de nettoyage et du rinçage final. L'utilisation d'eau déminéralisée pour le rinçage final permet d'éviter les taches d'eau mais aussi de protéger l'aluminium anodisé.



La solution d'application pour le nettoyage manuel doit être renouvelée au minimum chaque jour et doit être remplacée en cas de contamination visible.

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour usage professionnel.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées.
- La solution d'application neodisher MediClean Dental doit être entièrement rincée à l'eau (de préférence entièrement déminéralisée).
- Traitement des dispositifs médicaux : les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664
- Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.

Données techniques :

Valeur pH	10,4 – 10,8 (2 – 10 ml/l, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C) La valeur pH peut être différente en eau du réseau ou en eau adoucie et s'il y a, par exemple, des transferts d'eau de pré-rinçage
Densité	environ 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viscosité	< 10 mPa s (concentré, 20 °C)
Facteur de titrage	0,77 (selon l'échelle de titrage neodisher MediClean Dental)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :
< 5 % tensioactifs non ioniques et anioniques et enzymes

Marquage CE :

neodisher MediClean Dental est conforme aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Stocker au frais mais à l'abri du gel. Conserver à une température comprise entre 0 et 25 °C. Protéger de la lumière du soleil. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 2 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole .

Au fil du temps, le stockage dans les conditionnements d'origine fermés peut entraîner une modification de la couleur. Cela n'a toutefois aucune incidence sur les propriétés techniques du produit à l'utilisation.

Indications de risques et de sécurité :

neodisher MediClean Dental n'est pas une substance dangereuse selon le règlement CLP (CE) N° 1272/2008.

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. Pour l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

D'autres informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

MB 4053/3-2
Version : 05/23