




Produit de nettoyage pour le traitement mécanique d'instruments dentaires

Concentré liquide

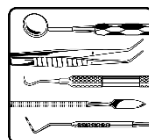

Domaine d'utilisation :

- Nettoyage mécanique d'instruments dentaires, y compris les instruments de transfert ainsi que les ustensiles dentaires comme les plateaux, les gobelets et les cuvettes
- Nettoyage manuel d'instruments dentaires en bain par immersion et à ultrasons

Leistungsspektrum:

- Élimine efficacement les résidus de sang desséché et dénaturé
- Provoque une forte dégradation des matières organiques et empêche la redéposition des résidus de protéines
- Soutient l'élimination des biofilms
- Convient aux instruments dentaires et ustensiles dentaires en acier inoxydable, matières plastiques habituelles et matériaux d'instruments de transfert
- L'appropriation de l'aluminium anodisé doit être contrôlée au préalable

Propriétés particulières :

- Très bonne préservation des matériaux
- Performance de nettoyage de premier ordre en raison de la formulation unique à base d'agents alcalinisants, tensio-actifs et enzymes
- Dans le cas d'une utilisation pour le prénettoyage manuel, aucun rinçage de la solution de nettoyage n'est nécessaire pour le traitement en machine suivant avec neodisher MediClean Dental
- Pas d'étiquetage : pas de substance dangereuse, pas de produit dangereux

Application et dosage :

neodisher MediClean Dental peut être utilisé dans les appareils de nettoyage et de désinfection ainsi que les bains par immersion et à ultrasons. Le dosage dépend entre autres du degré d'encrassement du produit à rincer.

Les paramètres suivants sont recommandés lors de l'application de neodisher MediClean Dental :

Nettoyage mécanique et manuel d'instruments dentaires :

Nettoyage mécanique d'instruments dentaires	2 - 10 ml/l (0,2 - 1,0 %)*, 40 - 60 °C, 5 - 10 min
Nettoyage manuel d'instruments dentaires en bain par immersion et à ultrasons	5 - 20 ml/l (0,5 - 2 %)*, max. 40 °C, 10 - 30 min

* le dosage dépend entre autres du degré d'encrassement

Des systèmes de dosage appropriés doivent être utilisés pour le dosage.

Les résidus de composite, de ciment dentaire et de matériaux d'empreinte doivent être éliminés des instruments avant qu'ils ne durcissent.

L'utilisation d'eau déminéralisée est recommandée pour le nettoyage et pour le rinçage final. L'utilisation d'eau déminéralisée dans le rinçage final permet à la fois d'éviter les tâches d'eau et de protéger en même temps l'aluminium anodisé.

La solution utilisée pour le nettoyage manuel doit être renouvelée tous les jours et remplacée en cas de salissures visibles.





Remarques générales concernant l'application :

- Pour usage commercial uniquement
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Avant de changer de produit, rincer à l'eau le système de dosage ainsi que les flexibles d'aspiration
- Le traitement doit être effectué conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations en vigueur avec des procédures validées adéquates.
- La solution d'utilisation neodisher MediClean Dental doit être rincée complètement à l'eau (de préférence entièrement déminéralisée).
- Traitement de dispositifs médicaux : Veuillez tenir compte des recommandations de traitement du fabricant des dispositifs médicaux conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664
- Les instructions d'utilisation des fabricants des appareils de nettoyage et de désinfection doivent être observées

Données techniques :

pH	10,4 - 10,8 (2 - 10 ml/l, déterminé dans de l'eau entièrement déminéralisée, 20 °C) Le pH peut varier s'il est déterminé dans l'eau du robinet ou adoucie ainsi que dans l'eau de prérinçage transvasée
Densité	env. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viscosité	< 10 mPa s (concentré, 20 °C)
Facteur de titrage	0,77 (conformément aux instructions de titrage neodisher MediClean Dental)

Composants :

Composants pour les produits de nettoyage selon le décret sur les détergents de l'UE :

< 5 % agents tensio-actifs non ioniques et anioniques
sauf enzymes

Marquage CE :

neodisher MediClean Dental répond aux exigences de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

En cas d'incident grave avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Conserver au frais, à l'abri du gel. Une température comprise entre 0 °C et 25 °C doit être respectée pour le stockage. À protéger contre les rayons du soleil. Peut être stocké pendant 2 ans en cas de stockage adéquat. Utilisable jusqu'à : voir impression se trouvant sur l'étiquette après le symbole .

Pendant le stockage, un changement de couleur peut se produire dans les emballages d'origine fermés. Les propriétés techniques d'utilisation n'en sont pas influencées pour autant.

Avertissements de danger et consignes de sécurité :

neodisher MediClean Dental n'est pas une substance dangereuse conformément au décret CLP (CE) n°. 1272/2008.

Ne jeter les emballages que s'ils sont vides et fermés. Élimination des restes de produits : voir la fiche de données de sécurité.

Vous trouverez des informations sur la sécurité et l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sous www.drweigert.de dans la rubrique « Service/Downloads ».

MB 4053 / 3-3
Version 03/25