




Reinigingsmiddel voor de machinale reiniging, desinfectering en/of sterilisatie van tandheelkundige instrumenten Vloeibaar concentraat

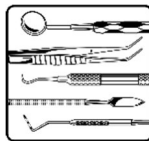

Toepassingsgebied:

- Machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten waaronder overdrachtsinstrumenten evenals gebruiksvoorwerpen in de tandartspraktijk zoals dienbladen, mondspoelbekers en spuwbakjes
- Handmatige reiniging van tandheelkundige instrumenten in een dompel- en ultrasoundbad

Werkingscapaciteit:

- Verwijdert op betrouwbare wijze resten aangedroogd en gedenatureerd bloed
- Zorgt voor een sterke vermindering van organisch materiaal en voorkomt redepositie van proteïneresten
- Ondersteunt het verwijderen van biofilms
- Geschikt voor tandheelkundige instrumenten en gebruiksvoorwerpen van roestvrij staal, gebruikelijke kunststoffen evenals materialen van overdrachtsinstrumenten
- Geëloxeerd aluminium moet vooraf worden gecontroleerd op geschiktheid

Bijzondere eigenschappen:

- Zeer materiaalvriendelijk
- Eersteklas reiniging dankzij de unieke samenstelling op basis van alkaliteitsdonoren, tensiden en enzymen
- Bij gebruik als handmatige voorreiniging is naspoelen van de reinigungsoplossing voor de daaropvolgende machinale reiniging met neodisher MediClean Dental niet nodig

- Zonder markeringen: geen gevaarlijke stoffen

Toepassing en dosering:

neodisher MediClean Dental kan in reinigungs- en desinfectieapparaten evenals in dompel- en ultrasoundbaden worden gebruikt. De hoeveelheid van de dosering is o.a. afhankelijk van de mate van vervuiling van de te reinigen artikelen.

De volgende parameters worden bij het gebruik van neodisher MediClean Dental aanbevolen:

Machinale en handmatige reiniging van tandheelkundige instrumenten:

Machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten	2 - 10 ml/l (0,2 - 1,0%)*, bijv. 40 - 60 °C, 10 min
Standaard aanbeveling	5 ml/l (0,5%)*, bijv. 55 °C, 10 min
Handmatige reiniging van tandheelkundige instrumenten in een dompel- en ultrasoundbad	5 - 20 ml/l (0,5 - 2%)*, max. 40 °C, 10 - 30 min

* De hoeveelheid van de dosering is o.a. van de mate van vervuiling afhankelijk

Gebruik bij dosering passende doseertoestellen.

Composietresten, tandcement en afdruk materiaal moeten vóór het uitharden van de instrumenten worden verwijderd.



In zowel de reinigingsstap als de afsluitende spoeling wordt aanbevolen volledig ontzilt water te gebruiken. Gebruik van volledig ontzilt water tijdens de laatste spoeling voorkomt watervlekken en beschermt tevens geanodiseerd aluminium.

De gebruiksooplossing voor de handmatige reiniging moet minimaal elke werkdag worden vernieuwd en bij zichtbare verontreiniging worden vervangen.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen
- Niet mengen met andere producten
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- De gebruiksooplossing van neodisher MediClean Dental moet in zijn geheel met water (bij voorkeur volledig zoutvrij water) worden afgespoeld.
- Reinigen, desinfecteren en/of steriliseren van medische hulpmiddelen: neem de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen in acht conform de eisen van DIN EN ISO 17664
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat op

Technische gegevens:

pH-waarde	10,4 - 10,8 (2 - 10 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C) Bij gebruik van water uit de waterleiding of onthard water, evenals door bijvoorbeeld resterend voorspoelwater, kan de pH-waarde afwijken
Dichtheid	ca. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)
Titreerfactor	0,77 (conform de titreerhandleiding van neodisher MediClean Dental)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:
< 5% niet-ionische en anionische tensiden, tevens enzymen

CE-markering:

neodisher MediClean Dental voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Koel maar vorstvrij opslaan. Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C worden aangehouden. Tegen zonlicht beschermen. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .



Tijdens de opslag kan er in de oorspronkelijk gesloten vaten een kleurverandering optreden. Dit heeft geen invloed op de eigenschappen met betrekking tot het gebruik van het product.

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

neodisher MediClean Dental is geen gevaarlijke stof volgens de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

Verdere veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

MB 4053 / 3-2

Versie: 05/23

