




neodisher® MediDry special



Naspoelmiddel voor de machinale
reiniging van thermostabiele en
thermolabiele instrumenten

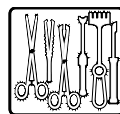

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

Naspoelen in reinigings- en desinfectieapparaten van medische hulpmiddelen zoals chirurgische instrumenten incl. oogheekundige instrumenten, MIC-instrumenten, anesthesiehulpmiddelen, instrumentencontainers, implantaten en babyflesjes.

Vermogensspectrum:

- Bevordert het droogproces, vooral van kunststof
- Geschikt voor alle materialen, vooral voor accessoires van anesthesiehulpmiddelen van polysulfon (PSU) en polyfenylsulfon (PPSU), bijvoorbeeld connectoren van larynxmaskers, adapters en containerdeksels
- Bij het beoogde gebruik van neodisher MediDry special zijn er geen gevolgen voor de biocompatibiliteit van de behandelde instrumenten (Biologische beoordeling van medische hulpmiddelen conform EN ISO 10993-1)

Bijzondere eigenschappen:

- Bevat geen tensiden
- Zuur ingesteld, neutraliseert alkalische residuen
- Vermindert het ontstaan van vlekken bij gebruik van gedemineraliseerd water voor het naspoelen
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit, voorkomt het ontstaan van spanningsscheuren in kunststof tijdens het steriliseren

Toepassing en dosering:

neodisher MediDry special wordt gebruikt voor de afsluitende spoeling in reinigings- en desinfectieapparaten gebruikt. De dosering hangt o.a. af van het materiaal van de te spoelen voorwerpen en de waterkwaliteit en bedraagt 0,3 - 1 ml/l.

Gebruik voor dosering passende doseertoestellen.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Het reinigen, desinfecteren en steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat.

Technische gegevens:

pH-waarde	3,8 - 3,5 (0,3 - 1 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,04 g/cm ³ (20 °C)
Viscositeit	< 10 mPa s (concentraat, 20 °C)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:

< 5% polycarboxylaat

tevens conserveringsmiddel

(chloormethylisothiazolinon / methylisothiazolinon)

CE-markering:

neodisher MediDry special voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie op de hoogte te worden gesteld.





neodisher® MediDry special

Opslaginstructies:

Het product moet bij een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden bewaard. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Gevaren- en veiligheidsinstructies

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.de in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 4571/3-1 Versie : 06/2020

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.de