




neodisher[®] MediKlar Dental



Produit de rinçage pour le traitement en machine d'instruments dentaires

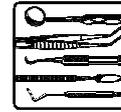

Concentré liquide

Domaine d'application :

- Rinçage en machine des instruments dentaires, y compris de contre-angles et d'ustensiles utilisés en cabinet dentaire tels que les plateaux, les gobelets de rinçage et les haricots.

Spectre d'efficacité :

- Améliore le mouillage des surfaces en acier inoxydable et en matières plastiques
- Accélère le séchage lors du traitement en machine
- En cas d'utilisation conforme de neodisher MediKlar Dental, la biocompatibilité des instruments traités n'est pas altérée (Évaluation biologique des dispositifs médicaux selon EN ISO 10993-1)

Propriétés particulières :

- Temps de séchage considérablement plus court
- Neutralise les résidus alcalins et les eaux alcalines.

Utilisation et dosage :

neodisher MediKlar Dental s'utilise dans les laveurs-désinfecteurs pour instruments dentaires. Le dosage s'effectue automatiquement via le système de dosage de la machine au rinçage final et s'élève à 0,2 à 0,4 ml/l.

Les systèmes de dosage doivent être adaptés au dosage de neodisher MediKlar Dental.

Recommandations générales d'utilisation :

- Pour un usage professionnel uniquement.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.
- Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes compatibles et validées.
- Les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.

Données techniques :

Valeur pH	4,0 – 3,7 (0,2 – 0,4 ml/l, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 50 mPa s (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Composants :

Composants pour détergents conformément au règlement européen relatif aux détergents 648/2004 :

< 5 % de phosphonates
15 – 30 % de tensioactifs non ioniques et agents de conservation (methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone)



neodisher[®] MediKlar Dental

Marquage CE :

neodisher MediKlar Dental est conforme aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Conserver à l'abri du gel. Conserver à une température comprise entre 0 et 30 °C.
Durée de conservation en cas de stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole .

Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

MB 4776/3-1
Version : 05/2020



Les informations fournies par cette fiche sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne dispensent pas pour autant l'utilisateur de procéder à ses propres tests et essais. Aucune affirmation contraignante du point de vue juridique ne peut en être déduite.