




neodisher® MediKlar special



Środek płuczący do maszynowej obróbki narzędzi termostabilnych i termolabilnych

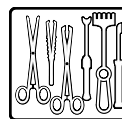

Płynny koncentrat

Obszary zastosowania:

- Do płukania w myjniach-dezynsektorach wyrobów medycznych, takich jak narzędzia chirurgiczne, włącznie z narzędziami okulistycznymi, sprzętem anestezyjologicznym, pojemnikami na narzędzia i implanty, a także butelek dla niemowląt
- Płukanie ram łóżek, które zgodnie z instrukcją producenta mogą być poddawane obróbce mechanicznej, w myjniach wielkogabarytowych

Zakres działania:

- Bardzo dobre właściwości zwilżające, nawet na trudnych do zwilżenia powierzchniach z tworzyw sztucznych
- Do szybkiego suszenia bez zacieków
- Stosowanie neodisher MediKlar special zgodnie z przeznaczeniem nie wpływa na biokompatybilność narzędzi poddawanych obróbce (ocena biologiczna wyrobów medycznych zgodnie z EN ISO 10993-1)
- Części wyposażenia anestezyjologicznego z polisulfonu (PSU) oraz z polifenylsulfonu (PPSU), takie jak łączniki do masek krtaniowych, zawory, adaptory i elementy pokryw pojemników sterylizacyjnych należy wstępnie sprawdzić na działanie środka, gdyż mogą pojawić się drobne rysy.

Szczególne właściwości:

- Znacznie skraca czas suszenia
- Neutralizuje pozostałości alkaliczne
- Redukuje ilość zacieków przy zastosowaniu zmiękczonej wody do ostatniego płukania

Użycie i dozowanie:

neodisher MediKlar special stosowany jest w myjniach-dezynsektorach i myjniach wielkogabarytowych. Zastosowana ilość jest uzależniona m.in. od obszaru stosowania,

rodzaju mytego materiału oraz jakości wody. Podczas korzystania z neodisher MediKlar special należy przestrzegać następujących parametrów:

- Do płukania narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezyjologicznego, pojemników na narzędzia, implantów i butelek dla niemowląt: 0,2 - 0,4 ml/l
- Do płukania ram łóżek: 0,2 - 0,8 ml/l

Myjnie-dezynsektory, myjnie wielkogabarytowe i systemy dozowania muszą być odpowiednie do stosowania neodisher MediKlar special.

Ogólne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozowania wraz z węzami ssącymi.
- Dekontaminacja wyrobów medycznych musi być przeprowadzana zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych i obowiązującymi zasadami przy zastosowaniu odpowiednich, zwalidowanych procedur.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów wyrobów medycznych dotyczących przygotowania do użycia zgodnie z wymogami DIN EN ISO 17664, zaleceń producentów ram łóżek dotyczących przygotowania do użycia, a także zaleceń grupy roboczej systemów do dekontaminacji ram łóżek i wózków (AK-BWA), zawartych w aktualnym wydaniu broszury AK-BWA „Dekontaminacja maszynowa”.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi producentów myjni dezynsektorów.



neodisher® MediKlar special

Dane techniczne:

Wartość pH	4,0 - 3,5 (0,2 - 0,8 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20°C)
Lepkość	< 50 mPa s (koncentrat, 20°C)
Gęstość	ok. 1,05 g/cm ³ (20°C)

Skład:

Składniki środków czyszczących zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004 w sprawie detergentów:

< 5% fosfoniany,

15 - 30% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, ponadto konserwanty (metylochloroizotiazolinon/metyloizotiazolinon)

Oznakowanie CE:

neodischer MediKlar special spełnia wymagania wynikające z europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z tym produktem, należy zgłosić go producentowi i właściwym organom.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od 0 do 30°C.

Przy prawidłowym przechowywaniu termin przydatności do użycia wynosi 3 lata. Najlepiej zużyć przed końcem: patrz nadruk na etykiecie za symbolem .

Informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska można znaleźć w karcie charakterystyki produktu. Jest ona dostępna na stronie www.drweigert.de w rubryce „Pliki do pobrania”.

Utylizować tylko puste i szczelnie zamknięte opakowania. Utylizacja pozostałości produktu: patrz karta charakterystyki.

MB 4073/3-2
Stan na: 07/2020

Informacje zawarte w niniejszej ulotce produktowej opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one użytkownika z przeprowadzania własnych testów i prób.