




neodisher® MediKlar special



Agente de enxaguamento para o reprocessamento automatizado de instrumentos termoe estáveis e termolábeis

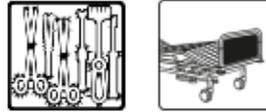

Líquido concentrado

Áreas de utilização:

- Enxaguamento de dispositivos médicos, tais como instrumentos cirúrgicos, incluindo instrumentos oftalmológicos, equipamento de anestesia, recipientes de esterilização e implantes, bem como biberões, em máquinas de lavar e desinfetar
- Lavagem de estruturas de cama em sistemas de descontaminação para grandes espaços sempre que as estruturas de cama sejam indicadas para o reprocessamento automatizado de acordo com as instruções de utilização do fabricante

Desempenho:

- Excelentes propriedades de humedecimento, mesmo em superfícies de plástico difíceis de molhar
- Para uma secagem rápida e sem riscos das peças a lavar
- Quando o neodisher MediKlar special é utilizado como previsto, a biocompatibilidade dos instrumentos tratados não é afetada. (Avaliação biológica de dispositivos médicos de acordo com a norma EN ISO 10993-1)
- Os acessórios dos utensílios de anestesia feitos de polisulfona (PSU) e polifenilsulfona (PPSU), por exemplo, conectores de máscaras de laringe, válvulas, adaptadores e partes de tampas de recipientes de instrumentos, podem formar fissuras de tensão devido ao processo de fabrico quando tratados com agentes de enxaguamento. Estes devem ser testados quanto à sua compatibilidade antes de serem utilizados

Propriedades especiais:

- Reduz consideravelmente o tempo de secagem
- Neutraliza os resíduos alcalinos acumulados
- Reduz a formação de manchas quando se utiliza água amaciada no enxaguamento final

Aplicação e dosagem:

neodisher MediKlar special é utilizado em máquinas de lavar e desinfetar e em sistemas de descontaminação para grandes espaços.

A dosagem depende, entre outros fatores, da respetiva área de utilização, dos artigos a lavar e da qualidade da água. Ao utilizar o neodisher MediKlar special, devem ser observados os seguintes parâmetros:

- Para o enxaguamento de instrumentos cirúrgicos, equipamento de anestesia, recipientes de esterilização, implantes e biberões: 0,2 - 0,4 ml/l
- Para o enxaguamento de estruturas de cama: 0,2 - 0,8 ml/l

As máquinas de lavar e desinfetar, os sistemas de descontaminação para grandes espaços e os sistemas de dosagem devem ser adequados para a utilização do neodisher MediKlar special.

Instruções de utilização:

- Apenas para uso profissional.
- Não misturar com outros produtos.
- Lavar o sistema de dosagem com água, incluindo o tubo de sucção, antes de mudar de produto.
- O reprocessamento deve estar em conformidade com todos os regulamentos relativos a dispositivos médicos e deve ser realizado com processos validados adequados.
- Respeite as recomendações de reprocessamento dos fabricantes de dispositivos médicos, de acordo com os requisitos da norma DIN EN ISO 17664, as recomendações de reprocessamento dadas pelos fabricantes de estruturas de cama, bem como as recomendações do grupo de trabalho sistemas de descontaminação de estruturas de camas e veículos (AK-BWA) (na edição atual da brochura AK-BWA "Descontaminação automatizada").
- As instruções fornecidas pelo fabricante da máquina de lavar e desinfetar devem ser respeitadas.



neodisher® MediKlar special

Dados técnicos:

Valor pH	4,0 – 3,5 (0,2 – 0,8 ml/, determinado em água desionizada, 20 °C)
Viscosidade	< 50 mPa s (concentrado, 20 °C)
Densidade	aprox. 1,05 g/cm ³ (20 °C)

Ingredientes:

Ingredientes de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes:

< 5 % de fosfonatos, 15 - 30 % de tensoativos não-iónicos, também conservantes (methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone)

Marcação CE: 

O neodisher MediKlar special está em conformidade com as normas europeias para dispositivos médicos.

Em caso de incidente grave com o produto, comunique-o ao fabricante e à entidade nacional competente.

Informações sobre a armazenagem:

Armazenar sempre a uma temperatura entre os 0 °C e 30 °C. Pode ser utilizado durante 3 anos, quando armazenado conforme recomendado. Para saber o prazo de validade, consultar a marca de carimbo no rótulo por detrás do símbolo weglassen .

Advertências de perigo e recomendações de precaução:

Para informações de segurança, consultar as Fichas de Dados de Segurança. Estas estão disponíveis, por exemplo, em www.drweigert.com, na categoria "Service/Downloads".

Eliminar apenas quando o recipiente estiver vazio e fechado. Para a eliminação de resíduos do produto, consultar a Ficha de Dados de Segurança.

MB 4073/3-2
Data de emissão: 07/2020
Trad_pt: 06/05/2024 Rev.00

As informações contidas nesta ficha de dados baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. Não dispensam o utilizador de efetuar os seus próprios testes e ensaios. Não é possível obter uma garantia juridicamente vinculativa de determinadas propriedades.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlentagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.com
www.drweigert.com