




neodisher® N

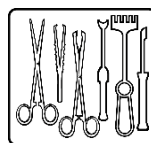

Agente ácido de limpieza y neutralizante para el reprocesamiento automatizado de instrumental, material de laboratorio hecho de vidrio y jaulas para animales

Concentrado líquido

Ámbito de aplicación:

- Neutralización de residuos alcalinos durante la limpieza automatizada de instrumental quirúrgico, equipos de anestesia, contenedores, calzado quirúrgico y biberones, así como otros productos sanitarios
- Neutralización de residuos alcalinos durante la limpieza automatizada de material de laboratorio hecho de vidrio
- Prelimpieza o limpieza ácida automatizada de material de laboratorio hecho de vidrio
- Limpieza ácida automatizada de jaulas para animales

Gama de prestaciones:

- Elimina las decoloraciones, la cal, los depósitos de orina y otra suciedad soluble en ácido
- Apto para objetivos de vidrio, material cerámico, acero inoxidable, plásticos resistentes a los ácidos y materiales de caucho
- No apto para metales no ferrosos, piezas cromadas o niqueladas y aluminio anodizado

Características especiales:

- Muy fácil de enjuagar
- Sin tensioactivos

Uso y dosificación:

neodisher N se utiliza en lavadoras-desinfectadoras para la neutralización, así como para la prelimpieza o limpieza. La dosis depende, entre otras cosas, de la aplicación. Al usar neodisher N, se deben respetar los siguientes parámetros:

Neutralización durante el reprocesamiento automatizado de instrumentos termoeestables y termolábiles y otros productos sanitarios, así como material de laboratorio hecho de vidrio	1-2 ml/l
Prelimpieza o limpieza ácida automatizada de material de laboratorio hecho de vidrio	2-4 ml/l 40-60 °C
Limpieza ácida automatizada de jaulas para animales	3-4 ml/l 60-80 °C

Para la dosificación se deben utilizar dosificadores adecuados.

Para evitar marcas de agua, se recomienda utilizar agua totalmente desmineralizada en el enjuague final.

La solución de aplicación de neodisher N debe enjuagarse por completo con agua (de preferencia totalmente desmineralizada).

Cuando utilice neodisher N para prelimpieza o limpieza, preste atención a la resistencia al ácido de los objetos que desee lavar, de la lavadora-desinfectadora y de los conductos de desagüe. Los tubos de desagüe de fibrocemento y de hierro fundido no son adecuados y requieren una neutralización previa de la solución antes del desagüe.

Indicaciones generales sobre el uso:

- Solo para aplicaciones comerciales.
- No lo mezcle con otros productos.
- Antes de cambiar de producto, enjuague con agua el sistema de dosificación, incluidos los tubos flexibles de succión.



neodisher® N

- El reprocesamiento debe realizarse de acuerdo con la legislación sobre productos sanitarios y la normativa aplicable, aplicando procedimientos validados adecuados.
- Tenga en cuenta las recomendaciones de reprocesamiento del fabricante del producto sanitario, de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664, las recomendaciones de limpieza del fabricante del material de laboratorio hecho de vidrio y las recomendaciones de reprocesamiento de los fabricantes de jaulas para animales, así como las recomendaciones del Grupo de trabajo de preparación de jaulas (AK KAB) de Alemania en la última edición del manual de AK KAB «Preparación correcta de jaulas en la cría de animales».
- Se deben observar las instrucciones de uso de los fabricantes de las lavadoras-desinfectadoras.

Instrucciones de almacenamiento:

Durante el almacenamiento, se debe mantener una temperatura de entre -15 °C y 30 °C. Se puede almacenar durante 3 años en las condiciones adecuadas. Fecha de caducidad: véase la fecha impresa en la etiqueta tras el símbolo .

Indicaciones de peligro y seguridad:

Encontrará información sobre seguridad y medio ambiente en las fichas de datos de seguridad. Están disponibles en www.drweigert.com, en la sección «Servicio/Descargas».

Deseche los envases solo si están completamente vacíos y cerrados. Eliminación del contenido sobrante: véase la ficha de datos de seguridad.

Datos técnicos:

Valor de pH	2,2-1,8 (1-4 ml/l, determinado en agua totalmente desmineralizada, 20 °C)
Viscosidad	< 50 mPa·s (concentrado, 20 °C)
Densidad	aprox. 1,5 g/cm ³ (20 °C)
Factor de titulación	0,16 (según las instrucciones de titulación de neodisher)

Ficha técnica 4201/3-1

Última actualización: 03/2020

Ingredientes:

Ingredientes para agentes de limpieza según el Reglamento CE de detergentes 648/2004:
> 30 % de fosfatos

Marcado CE:  

neodisher N cumple los requisitos de la legislación europea sobre productos sanitarios.

En caso de que se produzca un incidente grave con este producto, se deberá informar al fabricante y a la autoridad pertinente.

La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No exime al usuario de realizar sus propios ensayos y pruebas. No permite derivar ninguna garantía jurídicamente vinculante sobre determinadas propiedades.