




neodisher®



Aktívoxigén-bázisú tisztítószer-adalék műszerek gépi előkészítéséhez a Miele OXIVARIO-eljárás keretében

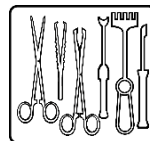

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

Lúgos kémhatású tisztítószerrel kombinálva a Miele által kifejlesztett és javasolt „Oxivario” és „Orthovario” eljárások során

Alkalmazása és adagolása:

Vegye figyelembe a Miele vállalat alkalmazásra, adagolásra és a más anyagokkal való összeférhetőségre vonatkozó információit.¹⁾

A teljes Miele OXIVARIO-eljárás végeztével ajánlott neodisher IP Spray-vel ápolni a csuklós műszereket.

Általános tudnivalók a használatához:

- A neodisher Oxivario oldatot teljesen le kell öblíteni (lehetőleg teljesen sómentes) vízzel.
- A vízfoltok elkerülése érdekében javasolt teljesen sómentes vizet használni a végső öblítésnél.
- Más termék-koncentrátummal nem keverhető.
- Az adagoláshoz megfelelő adagolóeszközök alkalmazandók.
- Csak ipari használatra.
- Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni.
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- Kérjük, vegye figyelembe a gyógyászati termék-gyártó előkészítési javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.

Technikai adatok:

pH-érték	5,7–5,5 (0,3–0,7%, teljesen sómentes víz esetén, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viszkozitás	< 50 mPas

Hatóanyagok:


A tisztítószer alkotórészei a mosó- és tisztítószerokról szóló 648/2004/EK rendelet értelmében:
> 30% oxigénalapú fehérítőszer

CE-jelzés:

A neodisher OXIVARIO megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

- 20 - 25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Napfénytől védett helyen tárolandó. Szakszerű tárolás esetén 2 évig tárolható. Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött nyomtatott dátumot.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A biztonságra és a környezetvédelemre vonatkozó információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a www.drweigert.com/hu honlapon, a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

A göngyölegyet csak teljesen kiürítve és lezárt állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapokat.

MB 4004/3-3
Állapot: 2023/01

¹⁾ A Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG-t nem terheli jogi kötelezettség (szavatosság nyújtása) az ezen Miele-eljárásokkal előkészített gyógyászati termékeken adott esetben fellépő változások esetén. A jelen tájékoztató lap adatai jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Nem mentesítik a felhasználót a saját ellenőrzési és kipróbálási kötelezettségétől. Ezek nem biztosítják jogilag kötelező érvénnyel, hogy bizonyos tulajdonságok fennállnak.



A gütersloh-i Miele Cie.
KG bejegyzett védjegye