




neodisher®

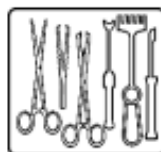

Intensificador de limpeza weglassen à base de oxigénio ativo para o reprocessamento automatizado de instrumentos com o processo OXIVARIO da Miele

Líquido concentrado

Áreas de utilização:

Utilizar como componente em combinação com detergentes alcalinos nos processos "Oxivario" e "Orthovario", desenvolvidos e recomendados pela Miele.

Utilização e dosagem:

Por favor, tenha em atenção as instruções da empresa Miele relativamente à utilização e dosagem, bem como à tolerância dos materiais.¹

Depois de todo o processo Miele OXIVARIO, recomenda-se que os instrumentos flexíveis sejam tratados com neodisher IP Spray.

Instruções de utilização:

A solução de neodisher OXIVARIO deve ser completamente enxaguada (de preferência com água desionizada).

Não misturar com outros produtos concentrados.

Para evitar manchas de água, recomenda-se a utilização de água desionizada no enxaguamento final.

Utilizar dispositivos de dosagem adequados.

Apenas para uso profissional.

Enxaguar com água o sistema de dosagem, incluindo a mangueira de sucção, antes de mudar o produto.

O reprocessamento deve estar em conformidade com todos os regulamentos relativos a dispositivos médicos e deve ser feito com processos validados adequados.

Respeite as recomendações de reprocessamento dos fabricantes de dispositivos médicos, de acordo com os requisitos da norma DIN EN ISO 17664.

Dados técnicos:

Faixa de pH	5,7 – 5,5 (0,3 – 0,7 %, determinado em água desionizada, 20 °C)
Densidade	aprox. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Viscosidade	< 50 mPas

Ingredientes:

Ingredientes de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes:

> 30 % de agentes de branqueamento à base de oxigénio

Marcação CE:

O neodisher OXIVARIO está em conformidade com as normas europeias relativas aos dispositivos médicos.

Se ocorrer um incidente grave com o produto, comunique-o ao fabricante e à autoridade nacional competente.

Informações sobre a armazenagem:

Conservar sempre a uma temperatura entre os - 20 °C e os 25 °C. Manter afastado da luz solar. Utilizável durante 2 anos quando armazenado conforme recomendado. Para saber o prazo de validade, consultar a marca de carimbo no rótulo por trás do símbolo weglassen .

Advertências de perigo e recomendações de precaução:

Para informações de segurança, consultar as Fichas de Dados de Segurança. Estas estão disponíveis, por exemplo, em www.drweigert.com na categoria "Service/Downloads".

Eliminar apenas quando o recipiente estiver vazio e fechado. Para a eliminação de resíduos do produto, consultar a Ficha de Dados de Segurança.

MB 4004/3-3

Data de emissão: 01/2023

Trad_pt: 16/01/2024 Rev.00

1) A Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG não é responsável por quaisquer obrigações legais (garantias) relativas a possíveis alterações de dispositivos médicos reprocessados com estes processos Miele. As informações contidas nesta ficha de dados baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. Não dispensam o utilizador de efetuar os seus próprios testes e ensaios. Não é possível obter uma garantia juridicamente vinculativa de determinadas propriedades.



Reg. Warenzeichen der Miele Cie. KG, Gütersloh