




neodisher[®] SBK

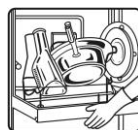

Speciaal naspoelmiddel voor gebruik in reinigings- en desinfectieapparaten voor bedpannen

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied

- Verwijdering van kalkaanslag en naspoeling bij de reiniging van bedpannen en urinalen in reinigings- en desinfectieapparaten met stoomdesinfectie

Overzicht van prestaties

- Voorkomt efficiënt kalkaanslag in stoomketels, leidingen en sproeiers, ook bij hoge waterhardheid
- Met speciale componenten voor een efficiënte vermindering van de waterhardheid
- Draagt bij tot een snelle, vlekvrrije droging

Bijzondere eigenschappen

- Schuimremmend, geschikt voor alle reinigings- en desinfectieapparaten voor bedpannen en urinalen met stoomdesinfectie
- Kan worden gebruikt bij alle waterhardheidswaarden
- Zuur ingesteld, op basis van organische zuren

Toepassing en dosering

neodisher SBK wordt gebruikt in reinigings- en desinfectieapparaten voor bedpannen en urinalen met stoomdesinfectie. Dosering gebeurt via de in de machine ingebouwde doseerapparatuur en bedraagt 0,5 - 1,5 ml/l naargelang van de waterhardheid. Houd rekening met de zuurbestendigheid van doseersystemen en stoomketels.

Bij hardnekkig vuil raden we aan aanvullend ook neodisher SBR extra te gebruiken, een speciaal reinigingsmiddel voor bedpannen en urinalen.

Algemene aanwijzingen voor gebruik

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voordat u een ander product gebruikt, moet u het doseersysteem incl. zuigslangen met water spoelen.
- De reiniging moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften volgens de juiste gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Neem de reinigingsaanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen in acht, overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 17664.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikanten van de reinigings- en desinfectieapparaten.
- Niet met andere producten mengen.

Technische gegevens

pH-waarde	3,7 - 3,0 (0,5 - 1,5 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,1 g/cm ³ (20 °C)

Ingrediënten

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia:
< 5 % polycarboxylaten
daarboven conserveringsmiddel (kaliumsorbaat, methylchlorisothiazolinon/methylisothiazolinon)

CE-markering:



neodisher SBK voldoet aan de voorschriften die voortvloeien uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.



neodisher[®] SBK

Wanneer zich een ernstig incident met dit product voordoet, moet dit aan de fabrikant en de bevoegde instantie worden gemeld.

Aanwijzingen voor opslag

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden aangehouden. Bij correcte opslag is het product 3 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie vermelding op het etiket na het symbool .

Gevaar- en veiligheidsinstructies

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek "Service/Downloads".

Verpakkingen alleen volledig leeg en afgesloten verwijderen. Voor het verwijderen van productresten verwijzen we naar het veiligheidsinformatieblad.

MB 4006/3-3 Versie 03/2020

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker er niet van om zelf tests en onderzoeken uit te voeren. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.
