




neodisher[®] SBR extra



Reinigingsmiddel voor gebruik in
reinigings- en desinfectieapparaten
voor bedpannen

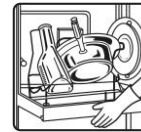

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Reiniging van bedpannen en urinalen in reinigings- en desinfectieapparaten voor bedpannen

Werkingscapaciteit:

- Verwijdert zelfs hardnekkige kalkzeepresten en sporen van cytostatica in menselijke uitwerpselen

Bijzondere eigenschappen:

- Instelling voor weinig schuim
- Te gebruiken bij iedere waterhardheid
- Kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van kalkaanslag en het naspoelen in reinigings- en desinfectieapparaten voor bedpannen

Toepassing en dosering:

neodisher SBR extra kan worden gebruikt voor reinigings- en desinfectieapparaten voor bedpannen die zijn voorzien van een doseerpomp voor reinigingsmiddelen. De dosering bedraagt 1 - 3 ml/l afhankelijk van de waterhardheid en de vervuilingsgraad.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- De neodisher SBR extra-gebruiksooplossing moet in zijn geheel met water worden afgespoeld.
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.

- Neem de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen in acht met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat.
- Niet mengen met andere producten.

Technische gegevens:

pH-waarde	11,2 - 11,5 (1 - 3 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,2 g/cm ³ (20 °C)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:
< 5 % fosfonaten
15 - 30 % EDTA

CE-markering:



neodisher SBR extra voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar te gebruiken. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool



neodisher[®] SBR extra

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 4007/3-2 Versie: 10/2021

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen tests en proeven.
Een juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen kan hier niet uit worden afgeleid.
