




neodisher® Septo DN



Désinfectant pour le traitement
en machine des endoscopes
flexibles et des instruments
thermolabiles

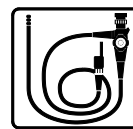

Concentré liquide

Domaine d'application :

- Désinfection d'endoscopes flexibles et d'instruments thermolabiles dans des laveurs-désinfecteurs



activité bactéricide,
fongicide,
mycobactéricide et
virucide

10 ml/l (1 %), 55 °C,
5 min

Spectre d'efficacité :

- Activité bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide confirmée par une expertise menée selon les normes européennes
- L'efficacité virucide a également été confirmée selon les exigences RKI/DVV¹
- Il est conseillé d'utiliser neodisher MediClean forte lors de l'étape de nettoyage.
- Le processus de traitement en machine avec neodisher MediClean forte et neodisher Septo DN est conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 15883-4 eu égard à la réduction logarithmique des germes (réduction de plus de 9 logs sur l'ensemble du processus).

Propriétés particulières :

- Particulièrement peu odorant
- Très bonne compatibilité avec les matériaux, compatible avec tous les endoscopes des principaux fabricants
- Exempt de formaldéhyde et de composés d'ammonium quaternaires (QAV)
- Efficacité désinfectante testée et validée conformément à la norme DIN EN 14885. neodisher Septo DN est donc conforme aux exigences imposées aux désinfectants destinés à la désinfection d'endoscopes flexibles conformément à la norme DIN EN ISO 15883-4.
- Inscrit sur la liste des désinfectants de l'IHO²

Utilisation et dosage :

neodisher Septo DN s'utilise dans les laveurs-désinfecteurs. Le dosage du neodisher Septo DN s'effectue via le système de dosage intégré au laveur-désinfecteur au début de la phase de désinfection. Pour obtenir le spectre d'efficacité microbiologique précité, les paramètres suivants doivent être respectés :

Pour éviter des taches d'eau, il est recommandé d'utiliser une eau déminéralisée lors du rinçage final.

Recommandations générales d'utilisation :

- Uniquement pour usage professionnel.
- Après son utilisation, la solution d'application neodisher Septo DN doit être entièrement rincée à l'eau (de préférence déminéralisée).
- Avant tout changement de produit, rincer à l'eau le système de dosage et les tuyaux d'aspiration.
- Le traitement doit être réalisé conformément à la législation sur les dispositifs médicaux et aux réglementations applicables avec des méthodes appropriées et validées.
- Les recommandations générales d'utilisation du fabricant des dispositifs médicaux sont à respecter conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664.
- Les notices d'instructions des fabricants des laveurs-désinfecteurs doivent être respectées.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.

Expertises :

L'efficacité désinfectante a été confirmée par des expertises. Ces expertises sont disponibles sur demande.

Données techniques :

Valeur pH	4,3 (1 %, déterminée en eau déminéralisée, 20 °C)
Viscosité	< 10 mPa s (concentré, 20 °C)
Densité	environ 1,0 g/cm ³ (20 °C)



neodisher[®] Septo DN

Composants :

Substances actives dans 100 g :
10,5 g glutaraldéhyde

Marquage CE : 

neodisher Septo DN satisfait aux exigences résultant de la législation européenne sur les dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec ce produit, il doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Consignes de stockage :

Conserver à une température comprise entre 0 et 30 °C. Durée de conservation en cas de stockage conforme : 3 ans. Utilisable jusqu'au : voir date imprimée sur l'étiquette après le symbole .

Indications de risques et de sécurité :

Les informations relatives à la sécurité et à l'environnement figurent dans les fiches de données de sécurité. Celles-ci sont disponibles sur www.drweigert.fr, dans la rubrique « Service / Téléchargements ».

Éliminer seulement les conditionnements complètement vidés et fermés. Pour l'élimination de produit restant, voir la fiche de données de sécurité.

MB 4010/3-5
Version : 06/2020

¹ Robert-Koch-Institut / Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten
(Société allemande de lutte contre les maladies virales)

² Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces)