




neodisher® Septo DN



Fertőtlenítőszer
flexibilis endoszkópok
és hőérzékeny műszerek
gépi tisztításához

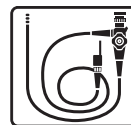

Folyékony koncentrátum



Alkalmazási terület:

- Flexibilis endoszkópok és hőérzékeny műszerek fertőtlenítése tisztító- és fertőtlenítőberendezésekben

Teljesítmény spektrum:

- A baktericid, fungicid, mikobaktericid és virucid hatékonyságot európai szabványok szerint szakértő igazolta
- Virucid hatékonyság az RKI/DVV¹ követelményeinek megfelelően is igazolva
- A tisztítási lépésben a neodisher MediClean forte tisztítószer használata ajánlott.
- A neodisher MediClean forte és neodisher Septo DN termékekkel végzett gépi tisztítási eljárás megfelel a DIN EN ISO 15883-4 szabványban előírt > 9 log-szintű baktériumcsökkentési követelményeknek a teljes folyamat során.

Különleges tulajdonságok:

- Különösen szagtalan
- Kiváló anyagkompatibilitás, minden vezető gyártó endoszkópjához alkalmas
- Formaldehid- és kvaterner ammóniumvegyületektől (QAV) mentes
- Fertőtlenítő hatás az EN 14885 szerint tesztelve és igazolva. A neodisher Septo DN így megfelel a DIN EN ISO 15883-4 szabványban meghatározott, flexibilis endoszkópok fertőtlenítésére vonatkozó követelményeknek.
- Az IHO² fertőtlenítőszer-listán szereplő termék

Alkalmazás és adagolás:

A neodisher Septo DN tisztító- és fertőtlenítő készülékekben használható. A neodisher Septo DN adagolása a tisztító- és fertőtlenítő készülékbe beépített adagolóval történik a fertőtlenítési lépés kezdetén. A megadott hatásspektrum elérése érdekében be kell tartani a következő paramétereket:

baktericid, fungicid, mikobaktericid és virucid hatás	10 ml/l (1,0 %), 55 °C, 5 min
---	----------------------------------

A vízfoltok elkerülése érdekében az utolsó öblítéshez teljes mértékben ioncserélt víz használata ajánlott.

Általános használati utasítás:

- Kizárólag ipari felhasználásra.
- A használat után a neodisher Septo DN alkalmazási oldatot maradéktalanul ki kell öblíteni vízzel (lehetőleg teljesen ioncserélt vízzel).
- A termékcseré előtt az adagoló rendszert, a szívócsöveket is beleértve, vízzel öblítse át.
- Az előkészítésnek az orvostechikail eszközökre vonatkozó jogszabályoknak és az érvényes előírásoknak megfelelően, megfelelő, validált eljárásokkal kell történnie.
- Kérjük, vegye figyelembe az orvostechikail eszköz gyártójának előkészítési ajánlásait a DIN EN ISO 17664 követelményeinek megfelelően.
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítő készülékek gyártójának használati utasításait.
- Ne keverje más termékekkel.

Szakvélemény:

A fertőtlenítő hatást szakértői vizsgálat igazolta. Kérésre szívesen rendelkezésre bocsátjuk a szakvéleményt.

Műszaki adatok:

pH-érték	4,3 (1,0%, ioncserélt vízben meghatározva, 20 °C)
Viszkozitás	< 10 mPa s (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,0 g/cm ³ (20 °C)



neodisher[®] Septo DN

Összetevők:

Hatóanyagok 100 g-ban:
10,5 g glutaral

CE-jelölés: 

A neodisher Septo DN megfelel az európai orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályok előírásainak.

A termékkel kapcsolatos súlyos eseményekről értesíteni kell a gyártót és az illetékes hatóságot.

Tárolási utasítások:

Tároláskor 0 és 30°C közötti hőmérsékletet kell biztosítani. Megfelelően tárolva 3 évig eltartható. Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum mögött.

Veszélyre figyelmeztető és biztonsági utasítások:

A biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatóak. Ezek a www.drweigert.hu weboldalon a „szolgáltatások/letöltések” részben érhetők el.

A csomagolást csak teljesen kiürítve és lezárva ártalmatlanítsa. A töltőanyag-maradványok ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 4010/3-5
Állapot: 2020. május

¹ Robert Koch Intézet / A Vírusos Betegségek Elleni Küzdelem Német Egyesülete

² Higiéniai és Felületvédelmi Ipari Szövetség