




neodisher® SystemClean

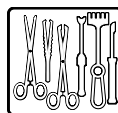

Eenyhén lúgos tisztítószer hőstabil és hőérzékeny műszerek előkészítéséhez

Magas koncentrációjú folyadék

Alkalmazási terület:

- Sebészeti eszközök, többek között MIC-eszközök és mikrosebészeti műszerek, anesztéziás eszközök, tartályok és egyéb orvostechnikai eszközök gépi tisztítása

A szolgáltatások köre:

Eenyhén lúgos tisztítókomponens, amely a neodisher® SystemAct enzimatikus tisztítókomponenssel együtt adagolandó a tisztító- és fertőtlenítő berendezés tisztítási lépésébe.

Az így kapott enzimatikus tisztítóoldat lúgos környezetben a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Megbízhatóan eltávolítja a rászáradt és denaturált vérmaradványokat, miközben rendkívül kíméletes az anyagokkal
- Megfelel a Robert Koch Intézet (RKI) orvostechnikai eszközök előkészítésére vonatkozó legújabb ajánlásainak, amelyek célja a Creutzfeldt-Jakob-kór új változata (vCJK) terjedési kockázatának minimalizálása
- Elősegíti a biofilmek eltávolítását
- Alkalmazható nemesacélból, műszeracélból, eloxált alumíniumból, optikákból, általános műanyagokból, valamint anesztéziás eszközökből készült műszerek és eszközök tisztítására
- Igény szerinti adagolás mellett kiválóan kíméli az eloxált felületeket

Különleges jellemzők:

- A szennyeződéshez egyedileg beállítható komponensek koncentrációja
- Magas koncentrációjú: maximális gazdaságosság
- Rendkívül kíméletes az anyaghoz
- Különösen alacsony habzású

- Kiváló tisztítóhatás az alkáli- és enzimkomponensek egyedileg beállítható kombinációjának köszönhetően
- Gépi előkészítésnél nincs szükség semlegesítési lépésre, így a programok gyorsan lefutnak
- Címkézésmentes: nem veszélyes anyag, nem veszélyes áru
- RFID-transzponderekkel ellátva a weigomatic system ALPHA komponensadagoló rendszerrel történő automatikus termékazonosításhoz, hogy biztonságosan kizárható legyen a termékek összekeveredése.

Alkalmazás és adagolás:

A neodisher® SystemClean és neodisher® SystemAct tisztítókomponensek tisztító- és fertőtlenítőberendezésekben használandók. Az adagolás mennyisége többek között a felhasználási területtől, az öblítendő tárgyaktól és a műszerek szennyezettségi fokától függ. A neodisher® SystemClean és a neodisher® SystemAct használatakor a következő paraméterek ajánlottak:

Hőstabil és hőérzékeny műszerek gépi tisztítása	0,5 - 1 ml/l (0,05 - 0,1 %) neodisher SystemClean
	0,5 - 1 ml/l (0,05 - 0,1 %) neodisher SystemAct pl. 30 - 60 °C, 10 min

Az adagolás a nagy koncentrációjú anyagok adagolására kifejlesztett weigomatic system ALPHA komponensadagoló rendszerrel történik.

A tisztító- és fertőtlenítőberendezésekben megfelelő adagolóberendezéseket kell használni.





neodisher® SystemClean

A tisztítási lépésben és a végső öblítés során demineralizált víz használata ajánlott.

Demineralizált víz használata a végső öblítés során megakadályozza a vízfoltok kialakulását és egyúttal védi az eloxált alumíniumot.

A klasszikus, lúgos tisztítószerекnél szükséges semlegesítési lépés elmaradhat. Szemészeti műszerek tisztításakor a végső öblítés előtt javasolt egy további, vízzel történő közbenső öblítés.

Általános használati utasítás:

- Kizárólag ipari alkalmazásokhoz.
- Az összetevőket ne keverje koncentrátumként.
- Ne keverje más termékekkel.
- Termékcseré előtt öblítse ki vízzel az adagolórendszert és a szívótömlőket is.
- Az előkészítést az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályoknak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, megfelelően validált eljárásokkal végezze el.
- Az alkalmazási oldatot teljesen le kell öblíteni (lehetőleg demineralizált) vízzel.
- Kérjük, tartsa be az orvostechnikai eszköz gyártójának előkészítési ajánlásait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítőgép gyártójának használati utasításait.

Műszaki adatok:

pH-érték	10,8 – 11,0 (0,5 - 1,0 ml/l, demineralizált vízben, 20 °C-on meghatározva)
Sűrűség	kb. 1,2 g/cm ³ (20 °C)
Viszkozitás	< 10 mPa s (koncentrátum, 20 °C)
Titrálási tényező	0,4 (a neodisher SystemClean titrálási útmutatója szerint)

Összetevők:

A tisztítószerек összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószer-rendelet szerint:

< 5% foszfát, polikarboxilátok

CE-jelölés:

A neodisher® SystemClean eleget tesz az európai orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályokból eredő követelményeknek.

Ha ezzel a termékkel súlyos váratlan esemény következik be, azt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságoknak.

Tárolási utasítások:

A tárolás során -18 °C és 30 °C közötti hőmérsékletet kell fenntartani. Megfelelő tárolás esetén 3 évig tárolható.

Felhasználható: lásd a címkén lévő lenyomatot a szimbólum mögött.

Veszély és biztonsági utasítások:

neodisher® SystemClean a CLP-rendelet (EK) 1272/2008 szerint nem minősül veszélyes anyagnak.

Csak üres és lezárt tartályok ártalmatlaníthatók. A töltőanyag-maradványok ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

További biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatók. Ezek elérhetők a www.drweigert.de oldalon a „Szolgáltatások/letöltések” menüpontban.

MB 4024/2-3
2025/09-i állapot