




neodisher® SystemClean

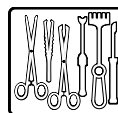

Łagodnie alkaliczny komponent myjący
do obróbki termostabilnych
i termolabilnych narzędzi

Płynny, wysoko stężony koncentrat

Obszary zastosowania:

- Maszynowe mycie instrumentów chirurgicznych, włącznie z narzędziami chirurgii małoinwazyjnej (MIC), mikronarzędziami, sprzętem anestezjologicznym, pojemnikami i innym wyposażeniem medycynotechnicznym.

Zakres działania:

Łagodnie alkaliczny komponent myjący dozuje się w etapie mycia w myjni-dezynfektorze razem z enzymatycznym komponentem myjącym neodisher® SystemAct.

Otrzymany w wyniku tego enzymatyczny roztwór myjący, w środowisku zasadowym, wykazuje następującą skuteczność:

- niezawodnie usuwa pozostałości zaschniętej i zdenaturowanej krwi, przy jednoczesnej wysokiej ochronie materiałowej
- zgodny z aktualnymi zaleceniami Instytutu Roberta Kocha (RKI) dot. obróbki wyrobów medycznych w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia nowej odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD).
- wspomaga usuwanie biofilmów
- odpowiedni do instrumentów i wyposażenia ze stali nierdzewnej, stali narzędziowej, anodowanego aluminium, elementów optycznych, typowych tworzyw sztucznych, jak również materiałów użytych przy sprzęcie anestezjologicznym
- wysoka ochrona anodowanego aluminium przy zachowaniu wymaganego poziomu dozowania

Szczególne właściwości:

- w zależności od stopnia zabrudzenia, możliwość indywidualnego dopasowania stężenia komponentów
- silnie skoncentrowany dla maksymalnej wydajności

- bardzo dobra ochrona materiałowa
- szczególnie niskopieniący
- pierwszorzędne rezultaty mycia, z uwagi na indywidualnie dopasowane połączenie alkalicznych i enzymatycznych komponentów
- przy maszynowej obróbce nie jest wymagany etap neutralizacji, co skraca przebieg procesu
- nie jest oznakowany jako mieszanina niebezpieczna
- posiada znacznik RFID do automatycznej identyfikacji produktu w systemie dozowania komponentowego weigomatic system ALPHA, aby wykluczyć pomyłkę.

Użycie i dozowanie:

Dozować komponenty myjące neodisher® SystemClean i neodisher® SystemAct do myjni-dezynfektora. Ilość jest uzależniona między innymi od obszaru stosowania, rodzaju mytego materiału oraz stopnia zabrudzenia instrumentu. Zalecane są następujące parametry przy użyciu neodisher® SystemClean i neodisher® SystemAct:

Maszynowe mycie narzędzi termostabilnych i termolabilnych	0,5 - 1 ml/l (0,05 - 0,1 %) neodisher SystemClean
	0,5 - 1 ml/l (0,05 - 0,1 %) neodisher SystemAct
	na przykład: 30 - 60 °C, 10 min.

Dozowanie odbywa się poprzez zaprojektowany specjalnie dla wysokoskoncentrowanych środków komponentowy system dozowania weigomatic system ALPHA.

W myjniach-dezynfektorach są do wykorzystania odpowiednie urządzenia dozujące



neodisher® SystemClean

W etapie mycia oraz końcowego płukania zaleca się stosowanie wody zdemineralizowanej.

Zastosowanie wody

zdemineralizowanej w końcowym płukaniu zapobiega powstawaniu zacieków wodnych i jednocześnie chroni anodowane aluminium.

Wymagany przy klasycznym, alkalicznym myciu etap neutralizacji można pominąć. Przy obróbce instrumentów optycznych zaleca się wykonanie dodatkowego płukania wodą, przed płukaniem końcowym.

Ogólne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Nie mieszać komponentów w postaci skoncentrowanej.
- Nie mieszać z innymi produktami.
- Przed zmianą produktu system dozowania wraz z węzami ssącymi należy przepłukać wodą.
- Dekontaminacja wyrobów medycznych musi być przeprowadzana zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych i obowiązującymi zasadami przy zastosowaniu odpowiednich, zwalidowanych procedur.
- Pozostałości roztworu muszą być całkowicie spłukane wodą (zalecana woda zdemineralizowana).
- Należy przestrzegać zaleceń producenta wyrobu medycznego dotyczących dekontaminacji zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 17664.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi producentów myjni-dezynfektorów.

Dane techniczne:

Wartość pH	10,8 – 11,0 (0,5 - 1,0 ml/l, w wodzie zdemineralizowanej, 20 °C)
Gęstość	ok. 1,2 g/cm ³ (20°C)
Lepkość	< 10 mPa s (koncentrat, 20°C)
Współczynnik miareczkowania	0,4 (zgodnie z instrukcjami miareczkowania neodisher SystemClean)

Skład:

Składniki środków czyszczących zgodnie rozporządzeniem WE nr 648/2004 w sprawie detergentów:

< 5 % fosforany, polikarboksylany

OznakowanieCE:

neodisher® SystemClean spełnia wymagania wynikające z europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z tym produktem, należy zgłosić go producentowi i właściwym organom.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze od -18 °C do 30°C. Przy prawidłowym przechowywaniu termin przydatności do użycia wynosi 3 lata. Najlepiej zużyć przed końcem: patrz nadruk na etykiecie za symbolem .

Informacje dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa:

neodisher® SystemClean nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny według Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Utylizować tylko puste i szczelnie zamknięte opakowania. Utylizacja pozostałości produktu: patrz karta charakterystyki.

Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska można znaleźć w karcie charakterystyki produktu. Jest ona dostępna na stronie www.drweigert.de w rubryce „Pliki do pobrania”.

MB 4024/2-3

Stan na 09/2025

Informacje zawarte w niniejszej ulotce produktowej opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one użytkownika z przeprowadzania własnych testów i prób.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com