




neodisher® SystemClean



Componente de limpeza ligeiramente alcalino para processamento de instrumentos termoláveis e termoláveis

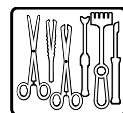

Líquido de alta concentração

Área de aplicação:

- Limpeza mecânica de instrumentos cirúrgicos, incluindo instrumentos MIS e microinstrumentos, utensílios de anestesia, recipientes e outros dispositivos médicos

Espectro de desempenho:

Componente de limpeza ligeiramente alcalino doseado no passo de limpeza do aparelho de lavagem e desinfecção juntamente com o componente de limpeza enzimático neodisher® SystemAct.

A solução de limpeza enzimática resultante em meio alcalino é caracterizada pelo seguinte desempenho:

- Remove com segurança os resíduos de sangue seco e desnaturado, mantendo um grau elevado de proteção do material
- Vai ao encontro das recomendações atuais do Instituto Robert Koch (RKI) para o processamento de dispositivos médicos para minimização do risco de transmissão da nova variante da doença de Creutzfeldt-Jakob (vCJD)
- Suporta a remoção de biofilmes
- Adequado para instrumentos e utensílios de aço inoxidável, aço de instrumentos, alumínio anodizado, óticas, plásticos comuns e materiais de utensílios de anestesia
- Alta proteção de anodização com dosagem baseada nas necessidades

Propriedades especiais:

- As concentrações dos componentes podem ser ajustadas individualmente de acordo com o nível de contaminação
- Altamente concentrado: rendimento máximo
- Muito boa proteção de materiais
- Espuma particularmente reduzida

- Desempenho de limpeza de primeira classe devido à combinação individualmente adaptável de componentes alcalinos e enzimáticos
- Sem necessidade de passo de neutralização para o processamento mecânico, resultando em sequências de programa curtas
- Sem necessidade de identificação: sem substâncias perigosas, não é mercadoria perigosa
- Equipado com transponder RFID para identificação automática do produto com o sistema de dosagem de componentes weigomatic ALPHA para evitar confusões de produtos de forma fiável

Utilização e dosagem:

Os componentes de limpeza neodisher® SystemClean e neodisher® SystemAct são utilizados em aparelhos de limpeza e desinfecção. A dosagem depende, entre outros fatores, da área de aplicação, dos produtos a lavar e do grau de sujidade dos instrumentos. Recomendam-se os seguintes parâmetros para utilização do neodisher® SystemClean e neodisher® SystemAct:

Limpeza mecânica de instrumentos termoláveis e termoláveis	0,5 - 1 ml/l (0,05 - 0,1 %) neodisher SystemClean
	0,5 - 1 ml/l (0,05 - 0,1 %) neodisher SystemAct
	p. ex., 30 - 60 °C, 10 min

A dosagem é realizada através do sistema de dosagem de componentes weigomatic ALPHA, especialmente desenvolvido para dosagem de altas concentrações.



neodisher® SystemClean

Nos aparelhos de limpeza e desinfecção devem ser usados os aparelhos de dosagem seguintes. Recomenda-se a utilização de água desmineralizada no passo de limpeza e no enxaguamento final. A utilização de

água desmineralizada no enxaguamento final evita manchas de água e protege o alumínio anodizado.

O passo de neutralização necessário para os produtos de limpeza alcalinos convencionais pode ser omitido. Ao processar instrumentos oftálmicos, recomenda-se um enxaguamento intermédio adicional com água antes do enxaguamento final.

Indicações gerais relativas à utilização:

- Apenas para aplicações comerciais.
- Não misturar componentes como concentrado.
- Não misturar com outros produtos.
- Enxaguar o sistema de dosagem, incluindo as mangueiras de aspiração, com água antes de mudar o produto.
- O processamento deve ser realizado de acordo com a legislação relativa a dispositivos médicos e regulamentos aplicáveis, utilizando procedimentos validados adequados.
- A solução de utilização deve ser enxaguada completamente com água (preferencialmente dessalinizada)
- Observe as recomendações de processamento do fabricante do dispositivo médico de acordo com os requisitos da norma DIN EN ISO 17664.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi producentów myjni-dezynfektorów.

Dados técnicos:

Valor de pH	10,8 – 11,0 (0,5 - 1,0 ml/l, definido em água desmineralizada, 20 °C)
Densidade	aprox. 1,2 g/cm ³ (20 °C)
Viscosidade	< 10 mPa s (concentrado, 20 °C)
Fator de titulação	0,4 (conforme instruções de titulação neodisher SystemClean)

Ingredientes:

Ingredientes para produto de limpeza segundo a diretiva CE relativa a detergentes 648/2004:
< 5 % fosfatos, policarboxilatos

MarcaçãoCE:

neodisher® SystemClean cumpre os requisitos resultantes da legislação europeia sobre dispositivos médicos.

Em caso de incidente grave com este produto, este deverá ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente.

Instruções para armazenamento:

Durante o armazenamento deve ser mantida uma temperatura entre -18 °C e 30 °C. Possível de armazenar durante 3 anos se armazenado corretamente. Pode ser utilizado até: ver a impressão na etiqueta por trás do símbolo .

Indicações de perigo e segurança:

neodisher® SystemClean não é uma substância perigosa conforme o Regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008.

Eliminar os recipientes apenas completamente vazios e fechados. Eliminação de resíduos do conteúdo: ver ficha de dados de segurança.

As informações de segurança e ambientais adicionais podem ser encontradas nas fichas de dados de segurança. Estão disponíveis em www.drweigert.de na secção "Assistência/Downloads"

MB 4024/2-3
Versão 09/2025

As informações desta ficha de dados baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. Não dispensam o utilizador de efetuar os seus próprios testes e ensaios. Não pode ser daqui derivada uma garantia juridicamente vinculativa de certas propriedades.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg

Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120

info@drweigert.de
www.drweigert.com