




neodisher® SystemRinse



Naspoelmiddel voor de machinale reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten

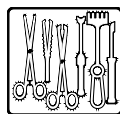

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Machinale spoeling van chirurgische instrumenten, inclusief MIC- en microinstrumenten, flexibele endoscopen, anesthesiehulpmiddelen, containers en andere medisch-technische hulpmiddelen

Werkingscapaciteit:

- Speciaal ontwikkeld voor neodisher system ALPHA voor hooggeconcentreerde vloeistoffen.
- Zeer goede vochtregulerende eigenschappen, voor snel en streeploos drogen van gereinigde instrumenten.
- Medische hulpmiddelen die zijn behandeld met neodisher SystemRinse hebben geen negatief effect op steriele verpakkingen van papier/folie waarmee ze in contact komen.
- Bij het beoogde gebruik van neodisher SystemRinse zijn er geen gevolgen voor de biocompatibiliteit van de behandelde instrumenten (Biologische beoordeling van medische hulpmiddelen conform EN ISO 10993-1).
- Bij accessoires van anesthesiehulpmiddelen van polysulfon (PSU) en polyfenyleensulfon (PPSU), zoals connectoren van larynxmaskers, ventielen, adapters en delen van deksels van instrumentencontainers, kunnen bij contact met naspoelingsmiddelen spanningsscheuren ontstaan. Deze accessoires moeten altijd vooraf worden gecontroleerd op geschiktheid.

Bijzondere eigenschappen:

- Verkort significant de droogtijd.
- Vermindert de tijd en energie die nodig is voor de machinale preparatie.
- Uitgerust met RFID-transponder voor de automatische identificatie van het product met

het componentdoseersysteem weigomatic system ALPHA om op een veilige manier productverwisselingen uit te sluiten.

Toepassing en dosering:

neodisher SystemRinse is geschikt voor gebruik in reinigings- en desinfectieapparaten. De dosering hangt o.a. af van de te spoelen voorwerpen en de waterkwaliteit en bedraagt 0,3 - 1,0 ml/l.

De dosering vindt plaats met het componentdoseersysteem weigomatic system ALPHA dat speciaal voor de dosering van hooggeconcentreerde vloeistoffen is ontwikkeld.

Gebruik in de reinigings- en desinfectieapparaten voor dosering geschikte doseertoestellen.

Het doseren wordt in het naspoelwater uitgevoerd.

Ter voorkoming van watervlekken wordt het gebruik van volledig ontzilt water in de afsluitende spoeling aanbevolen.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat op.
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.



neodisher[®] SystemRinse

- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664.

Technische gegevens:

pH-waarde	5,7 (0,3 - 1,0 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPa s (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:
< 5 % a-ionische tensiden, polycarboxylaten
5 - 15 % niet-ionische tensiden
en conserveringsmiddelen
2-octyl-2H-isothiazool-3-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1)

CE-markering:

neodisher SystemRinse voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Gevaren- en veiligheidsinstructies

U vindt veiligheids- en milieu-informatie in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten afvoeren. Afvoer van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

MB 4126/3-3
Versie: 02/2021



De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.