




neodisher® TN



Neutraal speciaal naspoelmiddel voor moeilijk te bevochtigen materialen

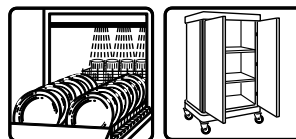

Vloeibaar concentraat

Toepassingsgebied:

- Naspoelen van servies, glazen, bestek, dienbladen en gebruiksvoorwerpen in professionele vaatwasmachines alsmede van containers en transportwagens in ontsmettingssystemen in alle voedselverwerkende bedrijven zoals professionele keukens, slagerijen en bakkerijen
- Naspoelen van moeilijk te bevochtigen materiaal zoals bedframes, nachtkastjes en transportwagens in ontsmettingssystemen in klinieken en verplegingsafdelingen

Werkingscapaciteit:

- Behaalt een schitterend glansspoelmiddelresultaat door een zeer goede bevochtiging van alle materialen
- Goede materiaalcompatibiliteit, speciaal afgestemd op de verschillende materialen die worden gebruikt voor bedframes en nachtkastjes
- In het bijzonder geschikt voor gebruik met zacht water
- Bij het beoogd gebruik van neodisher TN zijn er geen gevolgen voor de biocompatibiliteit van de behandelde medische instrumenten (Biologische beoordeling van medische hulpmiddelen conform EN ISO 10993-1)

Bijzondere eigenschappen:

- Zorgt voor een uitstekende bevochtiging en druipt- en streepvrije droging, zelfs van moeilijk te bevochtigen kunststof onderdelen
- Gering verbruik
- Uniform en residuvrij drogen

Toepassing en dosering:

neodisher TN kan worden gebruikt in professionele vaatwasmachines en ontsmettingssystemen.

Het automatische doseerapparaat bepaalt hoeveel neodisher TN er aan het naspoelwater wordt

toegevoegd. De dosering is afhankelijk van de waterkwaliteit, het type en materiaal van het behandelde vaatgoed en de naspoeltemperatuur. De optimale dosering van neodisher TN dient bij de inbedrijfstelling van de machine te worden ingesteld.

Afhankelijk van de waterkwaliteit, het vaatwerk en de naspoeltemperatuur	0,1 - 0,8 ml/l
--	----------------

In geval van hard of zouthoudend water is een speciale waterbehandeling vereist voor een optimaal spoelresultaat. Ter voorkoming van watervlekken wordt het gebruik van volledig onzilt water in de afsluitende spoeling aanbevolen.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Niet mengen met andere producten.
- Voordat u de producten vervangt, het doseersysteem inclusief zuigslangen met water spoelen.
- De bedieningsinstructies van de fabrikant van de vaatwasmachine moeten in acht worden genomen.
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen conform de eisen van DIN EN ISO 17664, de aanbevelingen van de fabrikant van de bedframes alsmede de aanbevelingen van het Arbeitskreis Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlage (AK-BWA) in de actuele editie van de AK-BWA-brochure 'Maschinelle Dekontamination' (machinale decontaminatie).



- Niet overgieten in andere houders, flacons e.d.

Technische gegevens:

pH-waarde	6,7 - 7,0 (0,1 - 0,8 ml/l, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Viscositeit	< 50 mPas (concentraat, 20 °C)
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:

< 5 % fosfonaat, polycarboxylaat
15 - 30 % niet-ionische tensiden en conserveringsmiddelen
Reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3:1)

CE-markering:

neodisher TN voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische producten.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 3 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

neodisher TN is geen gevaarlijke stof volgens de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.

Bij reglementair gebruik is het product onschadelijk in de zin van de toepasselijke richtlijnen voor de verwerking van voedingsmiddelen.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

Verdere veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

MB 3115/3-4
Versie: 06/2021

