




neodisher® Z



Savsemlegesítő és tisztítószer műszerek és laboratóriumi üvegedények gépi előkészítéséhez

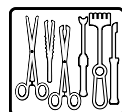

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Lúgos maradványok semlegesítése sebészeti eszközök, érzéstelenítő eszközök, tárolóedények, műtéti cipők, cumisüvegek és egyéb orvostechnikai eszközök gépi előkészítésekor.
- Semlegesítés vagy savas előmosás laboratóriumi üvegedények gépi tisztítása során ipari, víz- és orvostechnikai laboratóriumokban

Teljesítmény spektrum:

- Semlegesíti a gépi tisztítás fő lépésében keletkező lúgos maradványokat
- Az előtisztítás során megbízhatóan távolítja el a savval oldható maradványokat.
- Különösen anyagkompatibilis, ezért érzékeny anyagokhoz, például altató- és érzéstelenítő eszközökhöz, sebészeti műszerekhez és egyéb érzékeny anyagokhoz is alkalmas.
- Nem alkalmas eloxált alumíniumból készült tárgyak és alkatrészek, valamint krómozott és nikkelezett alkatrészek savas előtisztítására.

Különleges tulajdonságok:

- Szerves savakon alapul
- Nem tartalmaz foszfátokat, foszforsavat, nitrogéntartalmú vegyületeket és felületaktív anyagokat, ezért nem befolyásolja az analitikai vizsgálati módszereket.
- A koncentrátumban kevesebb mint 10 ppm P_2O_5 -t tartalmaz.

Alkalmazás és adagolás:

A neodisher Z tisztító- és fertőtlenítő készülékekben használható semlegesítésre és/vagy savas előtisztításra. Az adagolás többek között az alkalmazástól függ.

A neodisher Z alkalmazásakor a következő paraméterek betartását javasoljuk:

semlegesítéshez	1 - 2 ml/l
savas előtisztításhoz/tisztításhoz	2 - 5 ml/l, 40 - 60 °C

Az adagoláshoz megfelelő adagoló készüléket kell használni.

A vízfoltok elkerülése érdekében az utolsó öblítéshez teljes mértékben ioncserélt víz használata ajánlott. Ez egyidejűleg az eloxált alumíniumot is védi.

A neodisher Z előtisztításhoz történő használata esetén ügyeljen az öblítendő tárgyak, a tisztító- és fertőtlenítő készülék, valamint a lefolyóvezetékek savállóságára. Az eternit és az öntöttvas csövek nem alkalmasak, és ezek esetében előzetesen semlegesíteni kell a lefolyó oldatot.

Általános használati utasítás:

- Kizárólag ipari felhasználásra.
- Ne keverje más termékekkel.
- A neodisher Z alkalmazási oldatot maradéktalanul ki kell öblíteni vízzel (lehetőleg teljesen ioncserélt vízzel).
- A termékcseré előtt az adagoló rendszert, a szívócsöveket is beleértve, vízzel öblítse át.



- Az előkészítésnek az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályoknak és az érvényes előírásoknak megfelelően, megfelelő, validált eljárásokkal kell történnie.
- Kérjük, vegye figyelembe az orvostechnikai eszköz gyártójának előkészítési ajánlásait a DIN EN ISO 17664 követelményeinek megfelelően, valamint a laboratóriumi üvegedények gyártójának ajánlásait.
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítő készülékek gyártójának használati utasításait.

Műszaki adatok:

pH-tartomány	3,0 - 2,6 (1 - 5 ml/ ioncserélt vízben meghatározva, 20 °C)
Viszkozitás	< 10 mPa s (koncentrátum, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,2 g/cm ³ (20 °C)
Titrlási tényező	0,36 (a neodisher Z titrlási utasítás szerint)

Összetevők:

A tisztítószer összetevői a mosó- és tisztítószerekről szóló

648/2004/EK rendelet szerint:

Tartósítószer (2-oktil-2H-izotiazol-3-on)

CE-jelölés:



A neodisher Z megfelel az európai orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályok előírásainak.

A termékkel kapcsolatos súlyos eseményekről értesíteni kell a gyártót és az illetékes hatóságot.

Tárolási utasítások:

Tároláskor -3°C és 30°C közötti hőmérsékletet kell biztosítani. Megfelelően tárolva 3 évig eltartható.

Felhasználható: lásd a címkén a szimbólum mögött

A tárolás során az eredeti, lezárt kiszerelésben színváltozások léphetnek fel. Ez nem befolyásolja az alkalmazási tulajdonságokat.

Veszélyre figyelmeztető és biztonsági utasítások:

A biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatók. Ezek a www.drweigert.hu weboldalon a „szolgáltatások/letöltések” részben érhetők el.

A csomagolást csak teljesen kiürítve és lezárva ártalmatlanítsa. A töltőanyag-maradványok ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 4202/03/ 2 2020. márciusi állapot