




neodisher endo[®] CLEAN

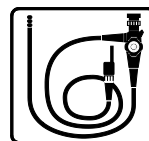

Tisztítószer flexibilis endoszkópok gépi és kézi előkészítéséhez

Folyékony koncentrátum

Alkalmazási terület:

- Flexibilis endoszkópok és azok tartozékainak tisztítása tisztító- és fertőtlenítőberendezésekben
- Flexibilis endoszkópok és azok tartozékainak merülő-, ill. ultrahangos fürdőben végzett kézi tisztítása

Hatásspektrum:

- A neodisher endo CLEAN kimagasló hatásfokkal távolítja el az organikus maradványokat, és megakadályozza azok újbóli lerakódását
- Megbízhatóan távolítja el a rászáradt és a denaturált vér maradványait
- Elősegíti a biofilmek eltávolítását
- Megfelel a Robert Koch Intézet (RKI) gyógyászati termékek előkészítésére vonatkozó, a Creutzfeldt–Jakob-szindróma új variánsa (vCJK) átadási kockázatának minimalizálására irányuló aktuális javaslatainak
- Az eloxált alumíniumon történő használatra való alkalmassága előzetes vizsgálatot igényel

Különleges tulajdonságok:

- Kiváló tisztítási teljesítmény a lúgos kémhatású anyagokon, tenzideken és enzimeken alapuló egyedülálló formulának köszönhetően
- Már alacsony hőmérsékleten is hatásos
- Habszegény formulájának köszönhetően nem rontja a tisztítóhatást habképződés
- Kimagasló összeférhetőség más anyagokkal; az összes vezető gyártó endoszkópjaihoz alkalmas
- A neodisher endo CLEAN kézi előtisztításhoz, valamint gépi újrafeldolgozási folyamatban történő alkalmazása esetén a köztes öblítési lépés a tisztító- és fertőtlenítőberendezésben előöblítési lépésként végezhető el

Alkalmazása és adagolása:

- Az optimális tisztítóhatás érdekében az alábbi paraméterek betartása szükséges:

Flexibilis endoszkópok gépi tisztítása	5 ml/l (0,5%), 35–55 °C, 3–10 perc
Hőálló tartozékok gépi tisztítása	2–10 ml/l (0,2–1%), 40–60 °C, 10 perc
Kézi tisztítás	5–10 ml/l (0,5–1%), max. 40 °C, 5–10 perc

A megfelelő tisztítóhatást a helyszínen, validálással alá kell támasztani.

- Kézi használat esetén, valamint hőálló tartozékok gépi tisztításakor az adagolási mennyiség a szennyezettség mértékétől függően változhat.
- A vízfoltok elkerülése érdekében javasolt teljesen ásványmentesített vizet használni a végső öblítésnél.
- A kézi tisztításhoz használt oldatot legalább minden munkanapon frissen ki kell keverni, és látható szennyeződés esetén azonnal ki kell cserélni.
- A neodisher endo CLEAN, neodisher endo SEPT GA és neodisher endo SEPT PAC egymással optimálisan összehangolt termékek:
A neodisher endo CLEAN a fertőtlenítő programba kerülve sem csökkenti a neodisher endo SEPT GA, ill. a neodisher endo SEPT PAC fertőtlenítő hatását.
- Az adagoláshoz megfelelő adagolókészülékek, ill. adagoló-segédesszközök alkalmazandók.



neodisher endo[®] CLEAN

Általános tudnivalók a használatához:

- Csak ipari használatra.
- Használat után a neodisher endo CLEAN oldatát (lehetőleg teljesen ásványmentesített) vízzel teljesen le kell öblíteni.
- Termékváltás előtt az adagolórendszert és annak szívócsöveit vízzel ki kell öblíteni.
- Az előkészítést a gyógyászati termékekre vonatkozó jogszabályok és az érvényes előírások szerint, megfelelő, validált eljárással kell végezni.
- Kérjük, vegye figyelembe a gyógyszeráttermék-gyártó előkészítési javaslatait a DIN EN ISO 17664 szabvány követelményeinek megfelelően.
- Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítőberendezés gyártójának kezelési útmutatóit.
- Más termékkel nem keverhető.

Technikai adatok:

pH-érték	10,8–11,2 (2–10 ml/l, teljesen ásványmentesített víz esetén, 20 °C) Városi vízben vagy lágyított vízben, valamint pl. sokáig álló előöblítő vízben a pH-érték eltérő lehet.
Viszkozitás	< 10 mPa s (koncentrációt, 20 °C)
Sűrűség	kb. 1,1 g/cm ³ (20 °C)
Titrlási faktor	0,76 (a neodisher endo CLEAN speciális titrlási útmutatója szerint)

Hatóanyagok:

A tisztítószer alkotórészei
a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK
rendelet értelmében:
< 5% nem ionos tenzidek, valamint enzimek

CE-jelölés:

A neodisher endo CLEAN megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó európai jogszabályok előírásainak.

Amennyiben súlyos incidens történik a jelen termék használatakor, ezt a gyártó és az illetékes hatóság felé kell jelenteni.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen tárolandó.
Napfénytől védett helyen tárolandó. 0 °C -
25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Szakszerű tárolás esetén 2 évig tárolható.
Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum
mögött nyomtatott dátumot.

A tárolási idő alatt az eredeti, zárt
göngyölegekben előfordulhat a folyadék
elszíneződése. Az alkalmazástechnikai
tulajdonságokat ez nem befolyásolja.

Veszélyre vonatkozó és biztonsági tudnivalók:

A neodisher endo CLEAN az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet
értelmében nem veszélyes anyag.

A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt
állapotban szabad ártalmatlanítani. A termék
maradékainak ártalmatlanítása: lásd a biztonsági
adatlapot.

További biztonsági és környezetvédelmi
információk a biztonsági adatlapokon találhatók.
Ezek a www.drweigert.hu honlapon,
a „Dokumentáció/Letöltések” fülön érhetők el.

MB 4074/3-8 Állapot: 2026. szeptember