



DR. WEIGERT
Sistemas de Higiene

Innovación de producto 2021



**Pensando
en el futuro –
Viviendo el
progreso.**

Descubre **neodisher®**
MediClean advanced.

Siempre se necesita a alguien que vaya por delante **para descubrir nuevos caminos.**

Sistemas de higiene.

Hay pocos ámbitos laborales en los que las cuestiones de higiene sean tan críticas como en el sector médico. Dr. Weigert ha ido perfeccionando constantemente los procedimientos de tratamiento de instrumental médico junto con los socios del sector y con la unidad de tratamiento de productos sanitarios.

No en vano, Dr. Weigert es líder en el mercado desde hace décadas en lo relacionado con procedimientos innovadores de tratamiento y aplicación que no solo son sencillos, seguros, económicos y ecológicos, sino que también cuidan los materiales y, como resultado, conservan su valor.

Reconocer los requisitos de forma anticipada: esto es lo que caracteriza a Dr. Weigert.

Perfeccionamos y optimizamos nuestros productos en estrecha colaboración con nuestros clientes, los usuarios de la unidad de tratamiento de productos sanitarios y nuestro Departamento de Investigación. La detección temprana de los deseos del cliente y de requisitos especiales es una de las competencias clave de los asesores especializados de neodisher®.

Este estrecho intercambio con los participantes en el proceso de tratamiento y sus experiencias conforman la base de nuestras innovaciones más recientes para el tratamiento mecánico de instrumental, que aúna las propiedades siguientes:

- Alta concentración con una potencia de limpieza especialmente elevada sin necesidad de emplear mucho producto
- Confiere brillo y luminosidad al instrumental
- Elimina las capas opacas y con ello aporta un tacto óptimo y duradero al instrumental
- Sostenibilidad gracias al uso eficiente de los recursos
- Excelente compatibilidad con los materiales, lo que garantiza la protección de los mismos

Descubra en las páginas siguientes la forma de beneficiarse de la potencia innovadora de neodisher® MediClean advanced.



¡Mayor potencia
de limpieza,
mayor luminosidad y
mejor
aspecto!



neodisher® MediClean advanced



(de)
Zur maschinellen und manuellen
Reinigung von thermostabilen und
thermolabilen Instrumenten
Flüssigkonzentrat - Nur für gewerbliche
Anwendung!

(en)
For automated and manual cleaning of
thermostable and thermolabile instru-
ments
Liquid concentrate - For professional use only!



(fr)
Pour le lavage mécanique et manuel des
instruments thermostables et thermo-
sensibles
Concentré liquide - Uniquement pour un
usage professionnel

(nl)
Voor machinale en handmatige reiniging
van thermostabiele en thermolabele
instrumenten
Geconcentreerde vloeistof - Voor professioneel
gebruik!



www.drweigert.de

For import addresses
www.drweigert.com



25 °C



4 029577 156206



LOT

5L e

Made in Germany

DR. WEIGERT

Los avances aportan seguridad.

neodisher® MediClean advanced representa un nuevo nivel de potencia para el tratamiento mecánico de instrumental. En numerosos ensayos prácticos se han podido documentar unos resultados de limpieza extraordinarios.

Máxima
seguridad
en cuanto a
higiene.

Concentrado y eficiente.

El extraordinario poder de limpieza del producto altamente concentrado ha sido confirmado por numerosos ensayos.

NOVEDAD



Resultados
radiantes:
incluso **bajo el**
microscopio.

Brillo hasta en el más mínimo detalle.

El brillo del instrumental asombra no solo a primera vista, sino también durante los controles bajo el microscopio, donde se aprecia claramente que el producto altamente concentrado protege los materiales durante la limpieza.

Una
diferencia
que se puede
incluso
sentir.

Porque menos, es más.

Gracias al reducido consumo de producto es posible organizar especialmente la logística de forma más sostenible.

Sí, es posible:
mayor eficiencia y
sostenibilidad.

Mayor rentabilidad.

Obtener la máxima higiene al tiempo que se cuidan los materiales constituye también un argumento empresarial muy sólido.

**La inversión
en durabilidad
se amortiza desde
el primer día.**

Flujo de trabajo optimizado.

Gracias al producto altamente concentrado facilitamos considerablemente el trabajo de su plantilla, reduciendo los cambios de bidón, lo que supone una descarga en las tareas.



**Manipulación
simplificada**
para proteger mejor a
sus empleados.




Un aspecto y tacto que sorprende.

Los ensayos prácticos demuestran que, gracias a una eliminación más eficaz de las capas opacas, se puede restaurar el tacto óptimo del instrumental y también mantenerlo a largo plazo.

Rendimiento excepcional y resultados brillantes con neodisher® MediClean advanced.

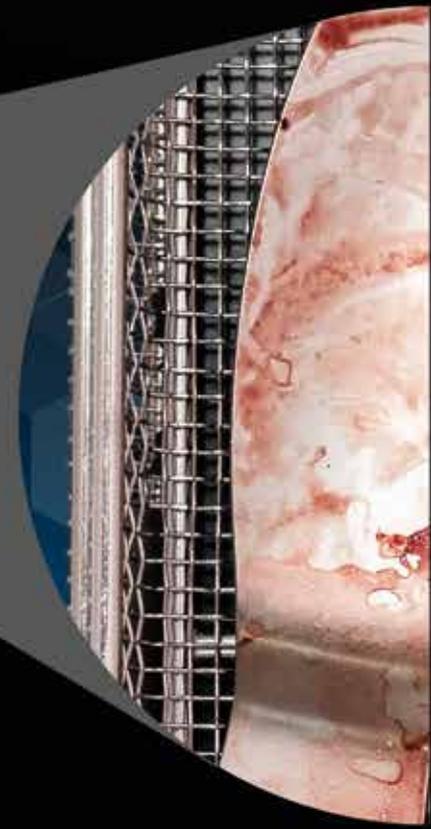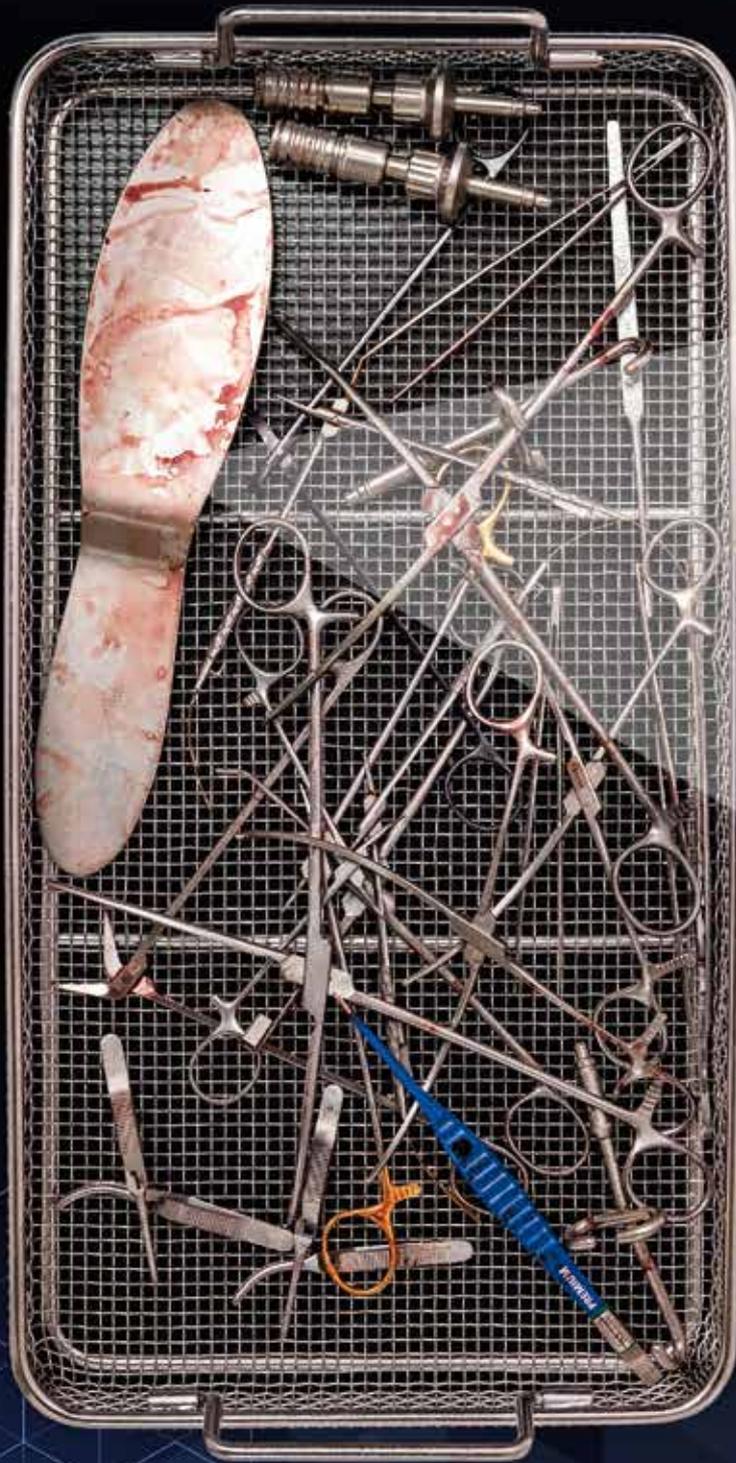

Instrumental con residuos secos de sangre y proteínas

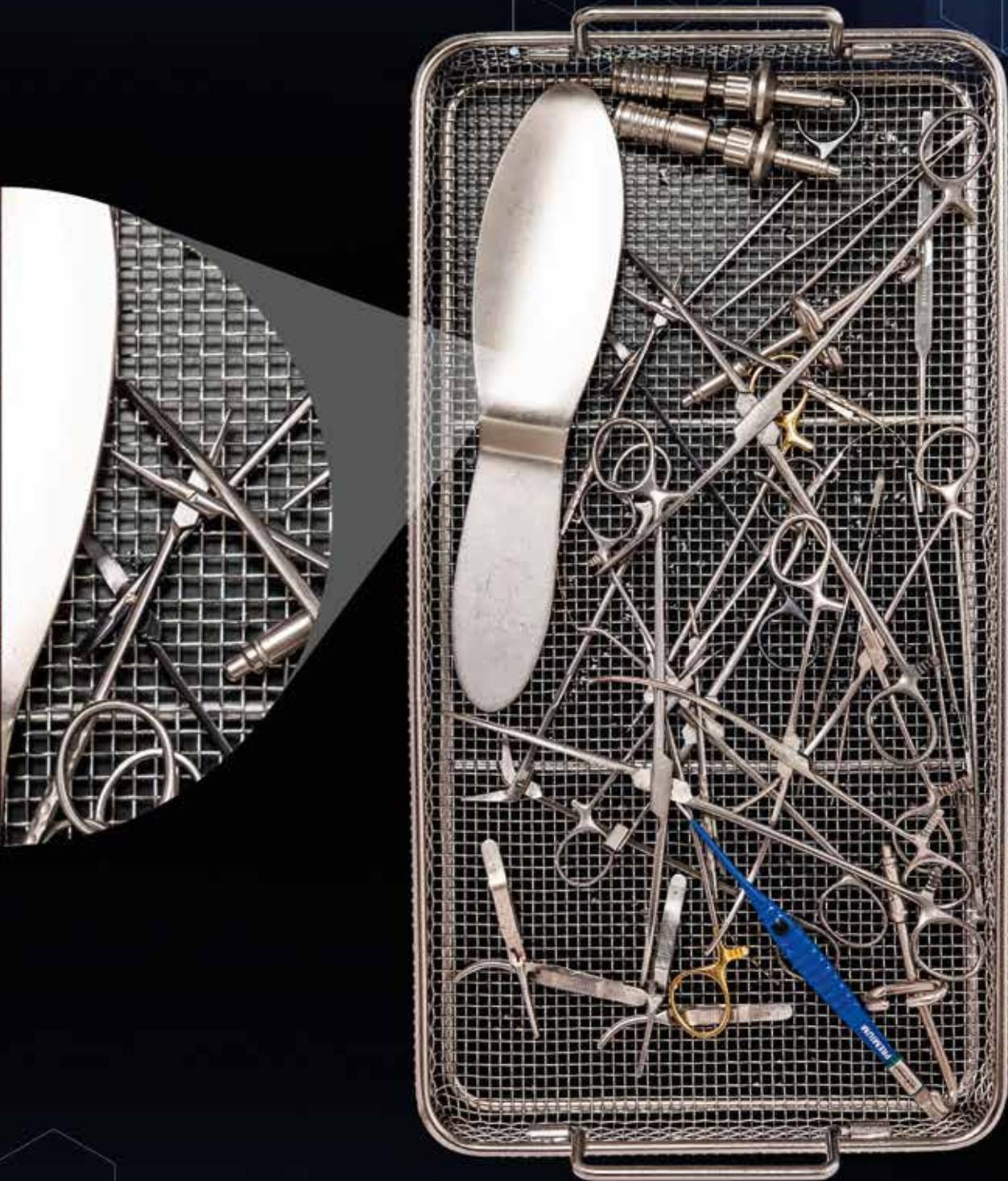

Instrumental tratado con
neodisher® MediClean advanced

La evaluación más valiosa de nuestras **innovaciones de productos es cómo se ven en la práctica.**



¡Nos tomamos muy en serio nuestra cercanía al cliente!

Sólo cuando la calidad de nuestras innovaciones se demuestra en la práctica de forma duradera, nuestros desarrolladores de producto consideran cumplido su objetivo.

El instrumental y los accesorios médicos deben tratarse de forma eficiente y rentable. Dr. Weigert, como especialista en soluciones de higiene para el tratamiento de productos sanitarios, conoce muy bien los diversos requisitos y dificultades asociados a los distintos tipos de suciedad de las diferentes especialidades médicas.

El intercambio exhaustivo de información con todos los responsables relevantes de los procesos sumado a nuestra dilatada experiencia contribuyen al perfeccionamiento y la optimización constante de nuestros productos y procesos. Tenemos la solución adecuada para cada uno de sus desafíos: desde el pretratamiento a la limpieza y el cuidado del instrumental. De esta forma podemos garantizarle unos resultados de primera calidad manteniendo y conservando el valor de los materiales.

Si tiene preguntas sobre la introducción de **neodisher®** **MediClean advanced** en su entorno clínico y sobre sus condiciones particulares, póngase en contacto con su asesor especializado de **neodisher®**.





«El ensayo con **neodisher® MediClean advanced** me ha dejado muy convencido. El instrumental brilla e incluso los restos resecos se han podido eliminar con una concentración mínima».

Sven Weingarte, unidad de tratamiento de productos sanitarios, hospital Klinikum Magdeburg

Descubra la
innovación
 de **neodisher®**
MediClean advanced.



neodisher® MediClean advanced: la innovación para el tratamiento de productos sanitarios.

neodisher® MediClean advanced

El innovador producto de limpieza altamente concentrado ofrece un excelente rendimiento de limpieza con la máxima eficiencia para una óptima rentabilidad.

- Para la limpieza automática de instrumental termoestable y termolábil, incluidos el instrumental de CMI, instrumental de microcirugía, instrumental odontológico, dispositivos de anestesia, contenedores y otros dispositivos médicos
- Para la limpieza manual de instrumental termoestable y termolábil en baños de inmersión o de ultrasonidos
- Apto para la limpieza manual y automática de instrumental da Vinci EndoWrist y otros instrumentos de cirugía asistida por robots



Barril de 220 kg
4130 13



Bidón de 20 l
4130 26



Bidón de 10 l
4130 30



Bidón de 5 l
4130 35****



Bidón de 5 l
4130 33****



6 botellas de 2 l
4130 41

El principio del éxito:

- Dosificación mínima
- Elimina las capas opacas y con ello aporta un tacto óptimo y duradero al instrumental
- Confiere brillo y luminosidad al instrumental
- La reducción de biofilms ha sido comprobada y confirmada en base a la norma ISO/TS 15883-5:2005

Recomendaciones de uso:

Limpieza automática de instrumental termoestable y termolábil

1 - 3 ml/l (0,1 - 0,3%)*,
40 - 60 °C, 5 - 15 min**

Limpieza automática de contenedores de aluminio anodizado

1 - 2 ml/l (0,1 - 0,2%)*,
40 - 50 °C, 3 - 5 min**

Limpieza automática de instrumental para cirugía asistida por robots

2 - 3 ml/l (0,2 - 0,3%)*,
40 - 60 °C, 10 - 30 min***

Limpieza manual de instrumental termoestable y termolábil en baños de inmersión y de ultrasonidos

1 - 10 ml/l (0,1 - 1%)*,
5 - 30 min**

Limpieza manual de instrumental para cirugía asistida por robots en baños de inmersión y de ultrasonidos

5 - 10 ml/l (0,5 - 1%)*,
5 - 30 min**/**

Nuestra competencia – su beneficio:

- Producto altamente concentrado
- Elimina de forma fiable restos de sangre seca y desnaturalizada, de proteínas, grasa, mucosidades, secreciones y polvo de hueso
- Protección óptima de los materiales
- Posibilidad de dosificación anticipada del producto de limpieza en el agua fría (directamente después de la entrada de agua)



- Máximo rendimiento con una dosificación mínima
- Poder de limpieza de primera categoría gracias a la fórmula exclusiva a base de agentes alcalinos, tensioactivos, agentes secuestrantes y enzimas
- Apto para instrumental, lentes y utensilios de acero inoxidable (p. ej., 1.4301), acero para instrumental (p. ej., 1.4034), titanio, vidrio, cerámica, plásticos que se puedan reprocesar, dispositivos de anestesia, así como aluminio anodizado
- Formulación que genera poca espuma y, por lo tanto, se evitan interrupciones del programa

* La dosificación depende del grado de suciedad

** Los tiempos de actuación dependen de la calidad del agua, del grado de suciedad y del mecanismo de limpieza

*** Se deberán tener en cuenta las recomendaciones de tratamiento del fabricante del producto sanitario según los requisitos de la norma UNE EN ISO 17664 y los ensayos de procedimiento

**** El artículo 413033 está diseñado para todos los procesos mecánicos, mientras que el artículo 413035 es apto para la consola de dosificación para desinfectantes como neomatik® medIDOS



DR. WEIGERT
Sistemas de Higiene



Siempre cerca en materia de higiene – **en Europa y en todo el mundo:**

Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg
info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG
CH • Zug
info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.
BE • Kinrooi-Geistingen
info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert España
ES • Madrid
info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS
FR • Villepinte
info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien
info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.
HU • Budapest
Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
NL • Assen
info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
PL • Warszawa
office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd
GB • Cannock
enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

