



## Medicina



Catálogo de productos.

### Siempre cerca en materia de higiene – en Europa y en todo el mundo:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
DE • Hamburg  
info@drweigert.de  
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
CH • Zug  
info@drweigert.ch  
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.  
BE • Kinrooi-Geistingen  
info@drweigert.be  
www.drweigert.be

Dr. Weigert España  
ES • Madrid  
info.spain@drweigert.com  
www.drweigert.es

Dr. Weigert France SAS  
FR • Villepinte  
info@drweigert.fr  
www.drweigert.fr

Dr. Weigert Handelsgesellschaft m.b.H.  
AT • Wien  
info@drweigert.at  
www.drweigert.at

Dr. Weigert Hungária Kft.  
HU • Budapest  
Info@drweigert.hu  
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV  
NL • Assen  
info@drweigert.nl  
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.  
PL • Warszawa  
office\_pl@drweigert.com  
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd  
GB • Cannock  
enquiry@drweigert.com  
www.drweigert.uk

Dr. Weigert USA  
US • Chicago  
info@drweigert.com  
www.drweigert.com

Distributed by:  
Comercializadora P&E

CL • Renca, Santiago  
info@grupopye.com  
www.grupopye.com

Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com



ES 1041 / 10-2024 © Dr. Weigert, Hamburgo

### Limpieza y desinfección de productos sanitarios.



**neodisher®:**  
nuestra experiencia  
garantiza su  
**seguridad.**

## Hace más de 30 años

... que neodisher® contribuye al desarrollo técnico del reprocesamiento de instrumental y sienta nuevas bases para ello.

... que los conceptos neodisher® garantizan resultados excepcionales y la durabilidad de materiales de calidad.

... que resolveremos incluso las tareas más complejas con nuestros conocimientos especializados en áreas que requieren un alto nivel de higiene. Profesionalidad en la que puede confiar.

## Profesionalidad de la mano de un solo proveedor.

Para un nivel de higiene seguro, es imprescindible contar con unos procesos de limpieza y desinfección reproducibles y validados. Sírvase de nuestra profesionalidad: los conocimientos de nuestros asesores especializados en **neodisher®** es un argumento contundente para elegir a Dr. Weigert. Le asesoraremos si tiene cualquier pregunta sobre la limpieza y desinfección de productos sanitarios y accesorios.

Los modernos sistemas de dosificación y control permiten determinar las cantidades y supervisar el caudal de los productos químicos utilizados. También permiten transferir datos a distancia para verificar que los procesos transcurran correctamente y documentar los lotes en el sistema de gestión de calidad. Los innovadores productos químicos de proceso, una óptima dosificación a través de modernos sistemas de dosificación **weigomatic®** y los diseños actuales le ofrecen el máximo nivel de seguridad, rentabilidad y sostenibilidad medioambiental.

## Sistema de asistencia para unos resultados excelentes.

Nuestro sistema de asistencia proporciona un asesoramiento continuado para lograr unos resultados excelentes a largo plazo. Encontraremos la respuesta a todas sus preguntas con rapidez gracias a nuestras décadas de experiencia, los profundos conocimientos especializados y la estrecha colaboración con los fabricantes de productos sanitarios y lavadoras-desinfectadoras. Estamos completamente familiarizados con todas las lavadoras-desinfectadoras que hay disponibles en el mercado. Los dispositivos de dosificación requieren un mantenimiento periódico. Ayudamos a formar a sus empleados para cumplir los requisitos de unos procesos seguros.

El asesor especializado en **neodisher®** está a su disposición para cualquier pregunta; un profesional de confianza que le aconsejará sobre cómo reprocesar de forma segura los productos sanitarios.

## Reduced to the Max!

neodisher® MediClean advanced ofrece un nuevo nivel de rendimiento. Mirar al futuro y encontrar nuevas soluciones para nuestros clientes es lo que nos mueve en Dr. Weigert.

[www.drweigert.es](http://www.drweigert.es)



Rendimiento  
altamente  
concentrado



Mayor  
rentabilidad



Menor consumo  
de agua y  
energía



Servicio in  
situ incluido



**DR. WEIGERT**  
Sistemas de Higiene





## Reprocesamiento de productos sanitarios y accesorios

### neodisher® PreStop - Pretratamiento

**Inhibidor de la corrosión con acción de prelimpieza activa desde el quirófano – Espuma pulverizada –**  
Protector anticorrosión para pulverizar sobre instrumentos quirúrgicos directamente después de su uso en quirófano. Evita la corrosión por picaduras de los instrumentos de acero inoxidable debida a los residuos adheridos de sangre o solución salina fisiológica.  
Facilita la limpieza posterior. Apto para instrumental quirúrgico, incluidos los instrumentos de CMI.



### neodisher® MultiZym - Limpieza manual

**Detergente multienzimático – Concentrado líquido – Sin ácido bórico ni boratos, sin perfumes ni colorantes**  
Excelente acción limpiadora gracias a su fórmula multienzimática. Limpieza activa sin residuos que evita la redeposición de residuos de proteínas. Elimina las biopelículas. Excepcional compatibilidad con materiales, pH neutro.



### neodisher® Septo Active - Pretratamiento y desinfección manuales

**Detergente y desinfectante – Granulado – A base de ácido peracético: bactericida, levuricida, activo contra virus con envoltura (1,0 %, 5 min, 20 °C), esporicida contra C. difficile (1,0 %, 15 min, 20 °C)**

Para la prelimpieza desinfectante en baños de inmersión y ultrasónicos antes del reprocesamiento automatizado. pH neutro. Buen rendimiento de limpieza, sin fijación de proteínas. Excelente compatibilidad con materiales. Olor agradable. Sin aldehídos ni compuestos de amonio cuaternario. Incluido en la lista de la VAH<sup>1</sup>, registrado en la lista de desinfectantes de la IHO<sup>2</sup> e incluido en la lista de la ÖGHMP<sup>3</sup>.  
Con las tiras de prueba neodisher® test strips (n.º art. 981320) se puede comprobar la concentración de la solución de aplicación.



### neodisher® MediClean advanced - Limpieza manual y automatizada

**Detergente universal ligeramente alcalino – Líquido altamente concentrado – Con fuentes de alcalinidad, enzimas y tensoactivos**

Alta concentración con un rendimiento de limpieza especialmente alto, por lo que solo es necesario utilizar una pequeña cantidad de producto. Da brillo a los instrumentos. Elimina los depósitos opacos, lo que garantiza que los instrumentos mantengan un aspecto y un tacto óptimos a largo plazo. Sostenible, ya que conserva los recursos. Excelente compatibilidad con materiales, lo que favorece su conservación.



### neodisher® MediClean forte - Limpieza manual y automatizada

**Detergente universal ligeramente alcalino – Concentrado líquido – Con fuentes de alcalinidad, enzimas y tensoactivos**

Excelente compatibilidad con materiales, uso universal. Elimina de forma eficaz los residuos de sangre seca y desnaturalizada.  
Evita la redeposición de residuos de proteínas. Para la limpieza manual y automatizada de equipos de protección individual (EPI).



### neodisher® MediZym - Limpieza manual y automatizada

**Detergente con pH neutro, enzimático – Concentrado líquido –**

Limpieza con enzimas y componentes que potencian la acción limpiadora, a la vez que protegen el material. Elimina los residuos de sangre seca y desnaturalizada.



## Reprocesamiento de productos sanitarios y accesorios

### neodisher® FA - Limpieza automatizada

**Detergente alcalino – Concentrado líquido – Sin tensoactivos ni aditivos oxidantes**  
Excelente acción limpiadora y alta compatibilidad con materiales.



### neodisher® Z - Neutralización

**Neutralizante ácido – Concentrado líquido – A base de ácidos orgánicos. Sin tensoactivos ni fosfatos**

Para neutralizar residuos alcalinos arrastrados durante el reprocesamiento automatizado.



### neodisher® MediKlar - Aclarado

**Agente de aclarado – Concentrado líquido –**

Para el secado rápido y sin manchas en el reprocesamiento automatizado de instrumental quirúrgico, incluidos instrumentos oftalmológicos, utensilios de anestesia, recipientes de esterilización, endoscopios flexibles, implantes y biberones. Reduce considerablemente el tiempo de secado.



### neodisher® IP Spray - Conservación

**Lubricante para instrumental quirúrgico – Aerosol – A base de aceite blanco altamente purificado**


Para la lubricación manual de instrumental articulado tras el reprocesamiento automatizado. No provoca incrustaciones ni afecta a una posterior esterilización por vapor o aire caliente. Toxicológicamente inocuo.



### neodisher® IR - Limpieza en profundidad

**Detergente ácido para limpiar en profundidad – Concentrado líquido –**

Para la limpieza en profundidad de instrumental quirúrgico de acero inoxidable en baños de inmersión y ultrasónicos. Se eliminan las manchas, la capa de óxido y el óxido extraño. Tenga en cuenta la ficha técnica del producto antes de usarlo.

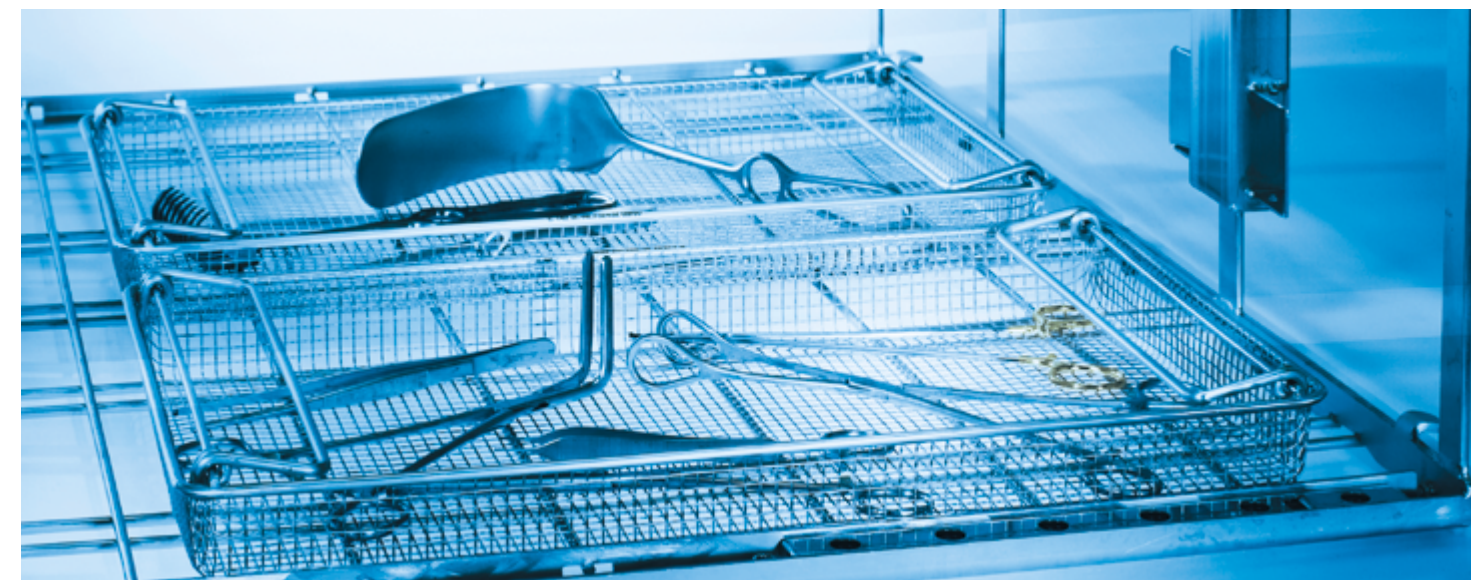





## Reprocesamiento de cuñas y botellas de orina

### neodisher® SBR extra - Limpieza

**Detergente – Concentrado líquido –**

Elimina incluso las manchas más difíciles, como los residuos de cal saponificada y los residuos de agentes citostáticos procedentes de excrementos humanos. Apto para lavadoras-desinfectadoras de cuñas equipadas con la bomba dosificadora correspondiente.



### neodisher® SBN plus - Quelación y aclarado

**Producto combinado de quelación y aclarado – Concentrado líquido – A base de ácidos orgánicos y tensoactivos**

Evita de forma eficaz la formación de depósitos de cal en generadores de vapor, tuberías y boquillas, incluso cuando se usa agua de alta dureza. Para un secado optimizado, rápido y sin dejar manchas. Apto para lavadoras-desinfectadoras de cuñas resistentes a los ácidos. Olor fresco y agradable.



### neodisher® SBK - Quelación y aclarado

**Producto combinado de quelación y aclarado – Concentrado líquido – A base de ácidos orgánicos**

Evita de forma eficaz la formación de depósitos de cal en generadores de vapor, tuberías y boquillas, incluso cuando se usa agua de alta dureza.

Contribuye a un secado rápido y sin dejar manchas. Efecto antiespuma. Apto para lavadoras-desinfectadoras de cuñas resistentes a los ácidos.



### neodisher® SBX - Quelación

**Producto quelante – Concentrado líquido –**

Evita la formación de depósitos de cal en los generadores de vapor. Apto para todas las lavadoras-desinfectadoras de cuñas.



## Sistemas de dosificación



### Sistemas de dosificación centrales

Los sistemas de dosificación centrales distribuyen productos químicos de proceso en grandes unidades de lavado a diversas lavadoras-desinfectadoras. Estos sistemas se pueden instalar en cualquier lugar, independientemente de dónde se encuentren las lavadoras-desinfectadoras. El uso de grandes recipientes no solo hace que la aplicación sea más económica, sino también muy conveniente para los usuarios en cuanto a seguridad laboral. ¡No se requiere un laborioso manejo de los bidones, ya que la dosificación tiene lugar en sistemas cerrados! El principio modular de **weigomatic®** combina soluciones individuales con un alto grado de flexibilidad y una variedad de opciones para ampliaciones posteriores. ¡Planificamos el sistema de dosificación óptimo según sus necesidades!

Con la gestión de datos **weigomatic®** se integran importantes aspectos de calidad en el proceso de limpieza y desinfección. Esto permite registrar y documentar de forma continuada en la memoria todos los datos relevantes, como los tiempos de funcionamiento y las cantidades consumidas de productos químicos de proceso. Dichos datos se pueden ver de forma clara en el ordenador o en el panel táctil, analizar desde el escritorio y evaluar localmente o a través de Internet. Así queda garantizada la máxima rentabilidad y la detección precoz de errores y averías, algo con lo que deben contar todos los procedimientos validados y que contribuye a su fiabilidad.

### Tecnología de dosificación y control: fiable y potente

La dosificación precisa de productos químicos de proceso y el registro de los datos importantes son esenciales para la validación de los procesos. Dr. Weigert lleva décadas siendo líder en el desarrollo de sistemas profesionales. A la luz de esta experiencia, le ofrecemos conceptos y soluciones a medida que garantizan la máxima seguridad, una alta rentabilidad y un manejo sencillo.

Todo aquel que sea responsable de la higiene sabe lo importante que es apostar por conceptos que garanticen una seguridad sostenible a largo plazo. La tecnología de dosificación y control de Dr. Weigert está en constante proceso de perfeccionamiento, adaptándose siempre a los requisitos más actuales gracias a nuestras décadas de experiencia.

### Dosificación inteligente: seguridad de procesos y gestión de datos

Los sistemas de dosificación modernos con registro de datos para el abastecimiento automático de lavadoras-desinfectadoras son un requisito fundamental para un transcurso seguro de los procesos, para que estos sean validables y para lograr unos resultados siempre óptimos al reprocesar los instrumentos.

Nuestros especialistas conciben, fabrican, instalan y realizan el mantenimiento de todo tipo de sistemas, desde la estación de dosificación más sencilla hasta sistemas centrales para varias lavadoras-desinfectadoras con los requisitos más exigentes y con registro y gestión de datos. Alta calidad, funcionalidad y profesionalidad: esos son los principios por los que nos regimos. ¡Planifique con nosotros sus nuevas instalaciones y remodelaciones!