



Maßgeschneiderte Lösungen – für Sicherheit und Werterhaltung.

Seit über 40 Jahren begleitet **neodisher®** die technische Entwicklung der Instrumentenaufbereitung und setzt neue Standards. **neodisher®** Konzepte garantieren erstklassige Ergebnisse und die Langlebigkeit hochwertiger Materialien.

Wir lösen mit unserem speziellen Know-how in hygienisch sensiblen Bereichen selbst die schwierigsten Aufgaben. Kompetenz, der Sie vertrauen können.

Innovative Prozesschemikalien, optimale Dosierung über moderne **weigomatic®** Dosiersysteme und zeitgemäße Konzepte bieten Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.

Unser System-Service steht für eine kontinuierliche Betreuung, damit erstklassige Resultate auch dauerhaft erzielt werden. Auf der Basis jahrzehntelanger Erfahrung, durch exzellentes Fachwissen und eine enge Zusammenarbeit mit den Herstellern von Medizinprodukten sowie von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten finden wir auf alle Fragen rasch die richtige Antwort. Wir schaffen die Voraussetzungen für sichere Abläufe.

Der **neodisher®** Fachberater ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragestellungen – zuverlässig und professionell für die sichere Aufbereitung von Medizinprodukten.



Einfach QR-Code scannen und Ansprechpartner vor Ort finden.
Oder unter www.drweigert.de/vertrieb

Die Instrumentenaufbereitung


...beginnt mit der fachgerechten Entsorgung der Instrumente im OP in geeignete Behälter und der sachgemäßen Beschickung des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG). Sie endet mit der Sterilisation und der dokumentierten Freigabe zur Wiederverwendung.

Unsere Top-Empfehlungen für den maschinellen Aufbereitungs- kreislauf von Medizinprodukten	neodisher® MultiZym	neodisher® MediClean forte	neodisher® Septo PreClean	neodisher® Septo Plus	neodisher® Septo Active	neodisher® IP Spray
Vorreinigung (manuell)	•	•				
desinfizierende Vorreinigung (manuell)			•	•	•	
Reinigung (maschinell)		•				
Pflege (manuell)						•

Unsere Top-Empfehlungen für den manuellen Aufbereitungs- kreislauf von Medizinprodukten	neodisher® MultiZym	neodisher® MediClean forte	neodisher® Septo PreClean	neodisher® Septo Plus	neodisher® Septo Active	neodisher® Septo Fin	neodisher® IP Spray
Vorreinigung	•	•					
desinfizierende Vorreinigung			•	•	•		
manuelle Reinigung	•	•					
manuelle Desinfektion			•	•	•*	•*	
Pflege							•

* auch geeignet zur Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte

Aufbereitungskreislauf für thermostabile Medizinprodukte

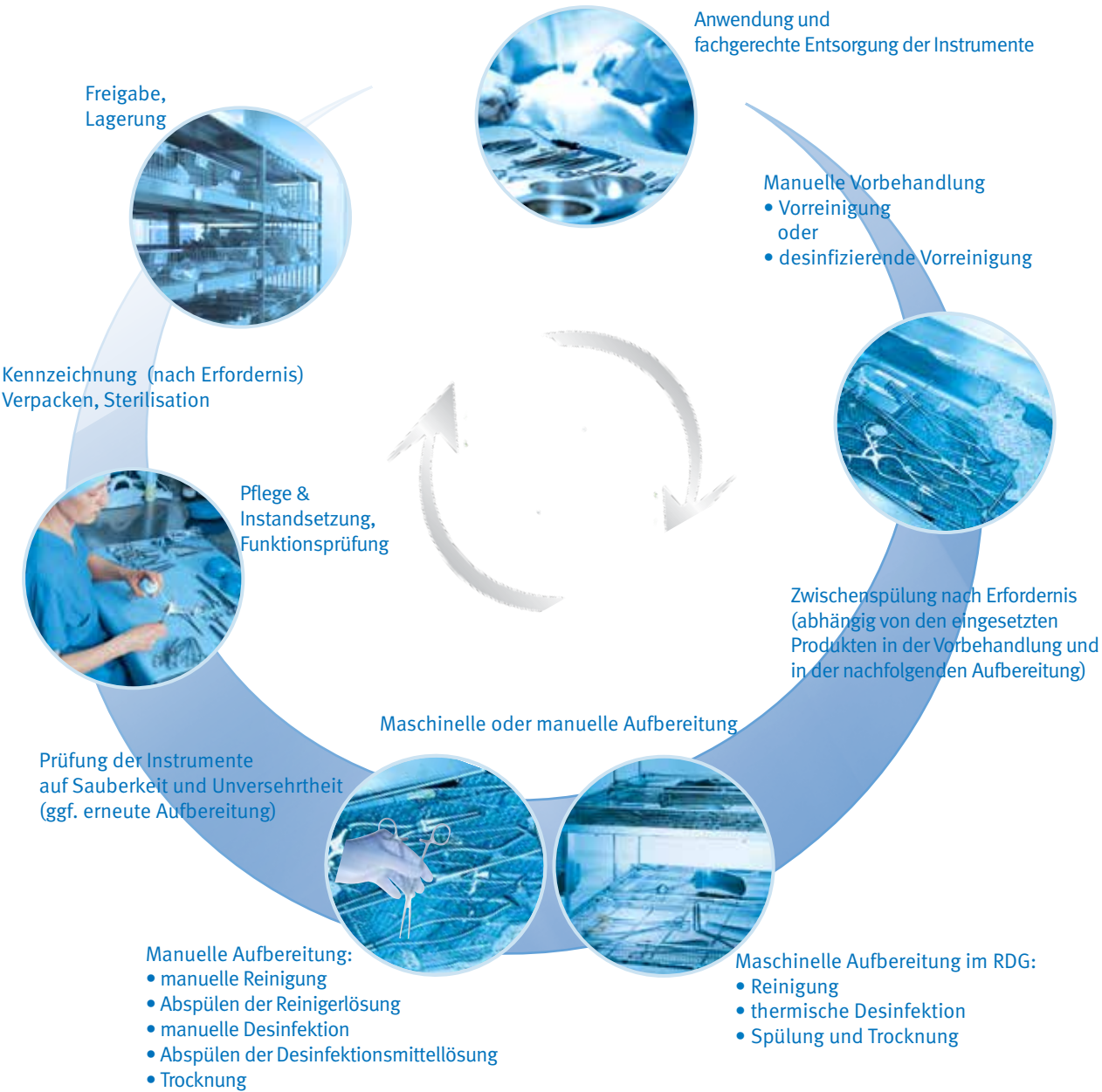

Unsere Top-Empfehlungen für die Aufbereitung von flexiblen Endoskopen	neodisher endo® CLEAN	neodisher endo® MED	neodisher endo® DIS active	neodisher endo® SEPT GA	neodisher endo® SEPT PAC
Vorreinigung	•				
desinfizierende Vorreinigung		•	•		
maschinelle Reinigung	•				
maschinelle Desinfektion				•	•
manuelle Reinigung	•				
manuelle Desinfektion			•		

Aufbereitungskreislauf für flexible Endoskope im RDG-E*



Die richtige Aufbereitung

... beginnt mit der fachgerechten Vorbehandlung des Medizinproduktes – möglichst unmittelbar nach der Anwendung, um eine Beeinträchtigung der Reinigung durch Antrocknen der Verschmutzung zu vermeiden.

Reinigung geht vor.

Die Reinigung steht am Anfang aller Aufbereitungsprozesse. Saubere Instrumente sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche Desinfektion und Sterilisation. Nur effiziente, reproduzierbare, dokumentierte und validierte Abläufe garantieren dabei die erforderliche Sicherheit.

Die manuelle Vorbehandlung

... erfolgt mit Reinigern oder kombiniert reinigenden und desinfizierenden Lösungen. Tenside ermöglichen es, wasser-unlösliche Stoffe (z.B. Fette) in Wasser zu emulgieren und in der Lösung zu tragen. Enzyme dienen zur Unterstützung des Abbaus organischer Rückstände.

Die maschinelle Aufbereitung

... ist gegenüber der manuellen Aufbereitung zu bevorzugen, da diese im geschlossenen System, standardisiert und validiert durchführbar ist. Weitere Vorteile sind neben der hohen Aufbereitungssicherheit die erhebliche Arbeitserleichterung sowie der Personal- und Materialschutz. Die spezifischen Anforderungen an die Reinigung werden von der Art der Verschmutzung, dem Grad der Verunreinigung sowie von der Vielfalt und der unterschiedlichen Empfindlichkeit der verschiedenen Materialien bestimmt. Werterhaltung steht neben Effizienz und Sicherheit im Mittelpunkt!

Hygiene-Sicherheit hat oberste Priorität!

Wer mit der Aufbereitung von Medizinprodukten zu tun hat, weiß, welche Anforderungen an die Prozess- und Ergebnisqualität gestellt werden. Reinigungs- und Desinfektionsprozesse müssen reproduzierbare Resultate auf höchstem Niveau erzielen. Dabei sind validierte und dokumentierbare Verfahren anzuwenden. Nutzen Sie das Know-how von Dr. Weigert, um Hygieneprozesse so zu realisieren, dass Effizienz, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im optimalen Verhältnis zueinander stehen.



In Sachen Hygiene
immer vor Ort –
**in Europa und
weltweit.**



Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
info@drweigert.de

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/12 a
1100 Wien
Tel.: +43-1-99460 6275
info@drweigert.at

Dr. Weigert (Schweiz) AG
Baarerstrasse 14
6300 Zug
Tel.: +41-41 561 32 90
info@drweigert.ch

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwaarsweg 3
9405 PT Assen
Tel.: +31-592-31 93 93
info@drweigert.nl

Dr. Weigert UK Ltd
Newmarket Suite 17
Keys Business Village
Keys Park Road
Cannock, WS12 2HA
Tel.: +44-1543478 817
enquiry@drweigert.com

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6A
01-531 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
office_pl@drweigert.com

Dr. Weigert España
Avda. de Europa 19, 3A
Parque Empresarial La Moraleja
28108 Madrid
Tel.: +34-91 793 2148
info.spain@drweigert.com

Dr. Weigert France SAS
22 avenue des Nations
Immeuble le Raspaill
BP 88035 Villepinte
95932 Roissy CDG Cedex
Tel.: +33-1-48 67 90 33
info@drweigert.fr

Dr. Weigert Hungária Kft.
Hunyadi János út 16
1117 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
info@drweigert.hu

Dr. Weigert management system – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

* Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Endoskope

Das
**Aufbereitungs-
1 x 1**
für **Medizin-
produkte.**